

Dispositif numérique de mesure des signes vitaux 800



Conçu pour la mesure précise des signes vitaux.



La prise des signes vitaux constitue souvent le premier contact avec les patients et fait partie de presque toutes les consultations. C'est pourquoi il est primordial que votre processus de mesure des signes vitaux soit aussi précis et efficace que possible. Continuer de prendre les signes vitaux manuellement pourrait comporter un risque pour vos patients.



Combien vous coûte la variabilité des signes vitaux?

Un processus fragmenté de mesure des signes vitaux peut ajouter jusqu'à 69 secondes par patient par rapport à leur mesure de tous les signes au chevet du patient avec un dispositif automatisé. Cette fragmentation entraîne des retards et une perte de temps évitables.

Pouvez-vous vous permettre cette variabilité?




Illustration du dispositif numérique de mesure des signes vitaux Midmark^{MD} 800

Améliorez votre offre de soins avec la mesure automatisée des signes vitaux.


- **La perte de temps** : En procédant à la mesure des signes vitaux et à la pesée directement au chevet du patient avec un dispositif de mesure automatisée vous gagnez en moyenne 69 secondes par patient¹. Ces secondes représentent **5 % de temps perdu** par assistant médical, soit environ **1 920 \$ par an**².
- **Le coût de refaire le travail** : Que vous ayez un seul cabinet comptant 5 assistants médicaux (5 x 1 920 \$ = 9 600 \$) ou 500 assistants médicaux (500 x 1 920 \$ = 960 000 \$) répartis dans plusieurs établissements, cela représente **une perte considérable**.
- **Le taux d'erreur** : La transcription manuelle des données relatives aux signes vitaux entraîne **un taux d'erreur de 17 %** en moyenne³. En supposant que vous preniez six mesures des signes vitaux chez 20 patients par jour, cela équivaut à environ **20 erreurs par jour**.
- **Mesures inexactes** : Les mesures manuelles de la pression artérielle peuvent être imprécises, avec une valeur moyenne supérieure de 10,8/3,1 mmHg à celle obtenue par mesure automatisée⁴.

La mesure automatisée des signes vitaux crée un processus standardisé, prend moins de temps au personnel et améliore la qualité des soins aux patients, tout en réduisant le gaspillage évitable.

LES COÛTS LIÉS AUX MESURES INEXACTES PEUVENT S'ACCUMULER RAPIDEMENT.

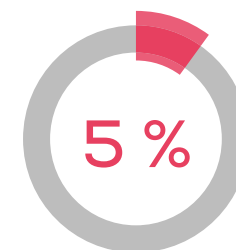

En temps perdu par assistant médical, soit environ 1 920 \$ par an.

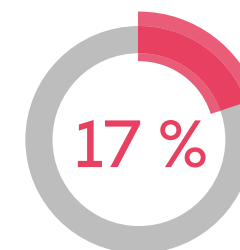

Taux d'erreur moyen.



Environ 20 erreurs par jour.



Dispositif numérique de mesure des signes vitaux Midmark^{MD} 800

Conçu pour la précision, la connexion aux dossiers médicaux électroniques (DME) et l'efficacité. Le dispositif Midmark 800 mesure la pression artérielle, la température, la fréquence cardiaque et, en option, la saturation en oxygène (SpO₂) et le rythme respiratoire. Connectez le dispositif Midmark 800 au fauteuil d'examen Barrier-Free^{MD} Midmark 626 équipé d'un pèse-personne numérique intégré pour peser les patients de manière rapide et discrète, sans qu'ils aient à quitter le confort du fauteuil d'examen.

DISPOSITIF NUMÉRIQUE DE MESURE DES SIGNES VITAUX MIDMARK 800

- Grand écran à contraste élevé pour un affichage optimal
- Méthodes de mesure de la pression artérielle non effractive à dégonflage linéaire et par paliers
- Protocole SPRINT intégré avec indications sur le positionnement du patient et des modes de mesure de la pression ponctuelle, personnalisée et moyennée.
- Mesure automatisée de la fréquence respiratoire disponible sur certains modèles
- Capteurs de SpO₂ en option (Nellcor ou Masimo)
- Intégration aux dossiers médicaux électroniques (DME) qui simplifie les étapes, réduit le nombre de clics et peut améliorer l'efficacité
- Mesure constante et précise des signes vitaux qui réduit la variabilité
- Saisie automatisée des signes vitaux qui fait gagner du temps au personnel et réduit les coûts inutiles.




Connexio harmonieuse avec les DME.

Intégrée à la solution.

Votre dispositif de mesure des signes vitaux Midmark est conçu pour s'intégrer de manière harmonieuse à votre plateforme de DME.



Illustration du dispositif numérique de mesure des signes vitaux Midmark^{MD} 800

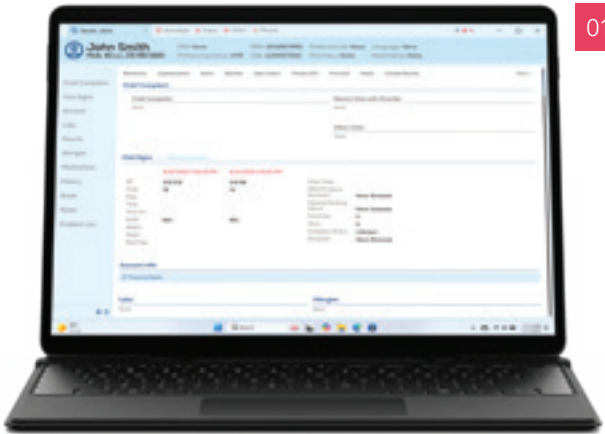

LANCER L'EXAMEN

01 Ouvrez le DME du patient et sélectionnez « Lancer ».



OBTENIR LE RÉSULTAT DE L'EXAMEN

02 Obtenez le résultat de l'examen sans quitter le DME.



VÉRIFIER + ENREGISTRER

03 Vérifiez les résultats de l'examen et enregistrez-les.



SYNCHRONISER LES DONNÉES AVEC LE DME

04 Les données de l'examen sont transférées directement dans le DME.



DÉCOUVREZ NOS PARTENAIRES DE DME

Le flux de travail peut varier légèrement selon le système de DME.

Midmark Connect fait le pont entre votre dispositif de diagnostic et les DME : cette solution est conçue pour éliminer la saisie manuelle, rationaliser les processus cliniques et garantir l'accès rapide à des données précises sur les patients.



BALAYEZ LE CODE POUR
EN SAVOIR PLUS.

Repensez le flux de travail lié aux signes vitaux



Illustration du dispositif numérique de mesure des signes vitaux Midmark^{MD} 800

Chaque cabinet est unique, tout comme chaque flux de travail. Grâce au dispositif numérique de mesure des signes vitaux Midmark^{MD} 800, configurez la saisie des signes vitaux en fonction de votre environnement, sans compromettre la précision, l'efficacité ou la connectivité.

DISPOSITIF DE MESURE DES SIGNES VITAUX EN SALLE AVEC ORDINATEUR EN SALLE

Idéal pour les environnements où l'équipement reste installé au même endroit. Le dispositif reste dans la salle, connecté à un ordinateur dédié, ce qui permet au personnel de se connecter et d'enregistrer immédiatement les mesures des signes vitaux, réduisant ainsi les interruptions et garantissant un flux de données constant.

Illustration du dispositif numérique de mesure des signes vitaux Midmark^{MD} 800 sur un support mural



DISPOSITIF DE MESURE DES SIGNES VITAUX MOBILE AVEC ORDINATEUR EN SALLE

Même si chaque salle d'examen dispose d'un ordinateur dédié, le dispositif peut quand même être déplacé d'une salle à l'autre selon les besoins. Il suffit d'apporter le dispositif dans la salle, de le connecter à l'ordinateur et de prendre les mesures des signes vitaux, qui sont ensuite transférées directement vers le DME.

Illustration du dispositif numérique de mesure des signes vitaux Midmark^{MD} 800 sur un chariot mobile



DISPOSITIF DE MESURE DES SIGNES VITAUX MOBILE AVEC ORDINATEUR PORTABLE

Cette option est idéale pour les ordinateurs portables ou les postes de travail partagés, car le dispositif se déplace facilement d'une salle à l'autre, tout en restant connecté au système pour synchroniser les résultats directement dans le DME. Cela représente un gain de temps précieux dans les cabinets achalandés.

Illustration du dispositif numérique de mesure des signes vitaux Midmark^{MD} 800 sur un poste de travail mobile



Installation flexible.

Adaptée à votre flux de travail.

Votre choix d’installation du dispositif est important. Midmark propose plusieurs solutions d’installation qui s’adaptent à votre flux de travail et à votre espace :

DISPOSITIF NUMÉRIQUE DE MESURE DES SIGNES VITAUX MIDMARK^{MD} 800



- 01 CHARIOT MOBILE**
PN : 9A747001
- 02 INSTALLATION SUR SUPPORT MURAL**
PN : 9A748001
- 03 INSTALLATION SUR POSTE DE TRAVAIL MOBILE**
PN : 002-11619-00

MATRICE DES MODÈLES : DISPOSITIF NUMÉRIQUE DE MESURE DES SIGNES VITAUX MIDMARK^{MD} 800

	4-000-0801	4-000-0802	4-000-0803	4-000-0804
Mesure non effractive de la pression artérielle : Ponctuelle	•	•	•	•
Mesure non effractive de la pression artérielle : Moyenne	•	•	•	•
Mesure non effractive de la pression artérielle : Protocole SPRINT	•	•	•	•
Mesure non effractive de la pression artérielle : Protocole personnalisé	•	•	•	•
Méthodes de dégonflage linéaire et par paliers	•	•	•	•
Thermométrie : Thermomètre Exergen ^{MD} TemporalScanner ^{MC}	•	•	•	•
Indice de douleur	•	•	•	•
Taille	•	•	•	•
Fréquence du pouls	•	•	•	•
Capteur de SpO ₂ : Masimo ^{MD}			•	•
Capteur de SpO ₂ : Nellcor ^{MD}		•		
Fréquence respiratoire automatisée				•





Accessoires

ACCESSOIRES ET FOURNITURES

CÂBLE PATIENT DU MODULE
D'OXYMÉTRIE (SPO₂) MASIMO^{MD}
2-200-0040



CÂBLE D'EXTENSION MASIMO
2-200-0042



TUYAU DE TENSIONMÈTRE À DOUBLE
CONDUITE
5-200-0089



PÈSE-PERSONNE DETECTO
SLIM PRO
9A713001



BLOC D'ALIMENTATION AC +
CORDON D'ALIMENTATION
015-12479-00 + 9A152012



CÂBLE USB-C POUR ORDINATEUR
015-12495-00



CAPTEUR DE SPO₂ NELLCOR^{MD}
2-200-0233



EXTENSION DE CÂBLE PATIENT
NELLCOR
2-200-0234



THERMOMÈTRE TEMPORAL
EXERGEN^{MD}
3-200-0047



CÂBLE SÉRIE POUR PÈSE-PERSONNE
NUMÉRIQUE MIDMARK^{MD} (6 PI)



CÂBLE SÉRIE POUR PÈSE-PERSONNE
NUMÉRIQUE MIDMARK (15 PI)



Vous trouverez davantage
d'accessoires et de
fournitures dans le [guide](#).

BRASSARD DE PRESSION
ARTÉRIELLE ADULTE
3-200-0032



BRASSARD DE PRESSION ARTÉRIELLE,
GRAND FORMAT, ADULTE
3-200-0034



CAPUCHONS TEMPORAUX JETABLES
EXERGEN





L'offre de Midmark

RESSOURCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consultez les caractéristiques techniques des solutions numériques de mesure des signes vitaux Midmark.



**BALAYEZ LE CODE
POUR VOIR LES
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES.**

CENTRE DE SOLUTIONS

- Flux de travail logiciel
- Découvrir les dispositifs
- Chercher les solutions
- Acheter
- Soutien après-vente
- Nous contacter



**BALAYEZ POUR
EXPLORER.**

MIDMARK CONNECT

Le pont entre vos dispositifs de diagnostic et les DME : cette solution est conçue pour éliminer la saisie manuelle, rationaliser les processus cliniques et garantir l'accès rapide à des données précises sur les patients.

MAINTENANCE LOGICIELLE

La première année est incluse. Les renouvellements annuels vous permettent de rester conforme, en sécurité et à jour pendant toute la durée de vie du dispositif.

SOURCES

- 1 <https://www.midmark.com/docs/default-source/documents/vital-signs-acquisition-infographic-rebrand-final875a1edfce4444108bb224ed547f0244.pdf>
- 2 En supposant un salaire de 20 \$/heure, 8 heures/jour et 48 semaines/an
- 3 Fieler, V. K., Jaglowski, T., & Richards, K. (2013). Eliminating errors in vital signs documentation. *Comput Inform Nurs*, 31(9), 422-427; quiz 428-429. doi:10.1097/01.NCN.0000432125.61526.27 PMID:24080751
- 4 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15985180/>



Designing better care.®

Nellcor est une marque de commerce de Covidien AG.

Masimo est une marque déposée de Masimo Corporation.

Exergen et TemporalScanner sont des marques de commerce d'Exergen Corporation.

Midmark est une entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
Certains produits ne sont pas certifiés. Consultez la liste complète sur :
midmark.com/ISO

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre
distributeur Midmark ou appelez au 1 800 MIDMARK.

Pour les appels hors des États-Unis, composez le 1 937 526-3662 ou visitez le
site Web midmark.com.

© 2026 Midmark Corporation, Versailles (Ohio), États-Unis.
Dans le but d'améliorer nos produits, des changements peuvent être apportés
sans préavis.

007-10539-02 Rev. A1 (8/26)

