

**Tabourets
et fauteuils**



**Vous méritez
de travailler
confortablement.
Notre gamme de
sièges est à votre
disposition pour
répondre à vos
attentes.**

Au quotidien, votre profession vous amène à travailler assis et debout. Votre assise doit donc vous apporter confort et soutien. Notre gamme de sièges vous propose un vaste choix de sièges rembourrés à large assise pour un confort optimal et une structure à base solide pour une excellente stabilité.

Depuis plus de 50 ans, Ritter est un fournisseur de produits sanitaires de qualité et est considéré comme l'un des chefs de file du secteur. Notre marque propose une gamme de sièges conçus pour durer.

Créez une atmosphère chaleureuse et accueillante pour votre personnel et vos patients en choisissant de vous équiper avec les tables et les meubles de rangement Ritter et Midmark.



Tabourets et fauteuils



Une conception et une fabrication qui dépasseront vos attentes

Le support à roulettes à cinq pieds garantit un soutien et une stabilité accrue, grâce à sa forme d'étoile permettant un meilleur accès au patient. Les roulettes à capuchon permettent un déplacement discret du tabouret sur tous les types de surfaces.

Les modèles manuels sont dotés d'une vis d'assemblage robuste en acier et les modèles pneumatiques d'un cylindre pneumatique pour un renforcement de la solidité et de la stabilité des tabourets. Le cylindre pneumatique a une fonction d'amortisseur pour vous protéger des chocs tout au long de la journée. Il est doté d'un système simple et efficace pour le réglage de la hauteur du siège (idéal pour de nombreuses interventions médicales).

La largeur d'assise et la densité du rembourrage en mousse offrent un confort optimal. Les coutures de la garniture sont lissées pour éviter l'apparition de marques sur les jambes. Optez pour un siège à dossier afin d'améliorer votre posture et assurer un meilleur soutien pour moins de fatigue à la fin de la journée.

Nous vous proposons un vaste choix de couleurs et d'accessoires pour que vous trouviez facilement le tabouret qui vous convient le mieux.

276 - Tabouret avec système de levage pneumatique

Notre best-seller ! Le modèle 276 est devenu une référence dans les établissements de santé.



Tabourets série Classic

Produits phares dans de nombreux établissements de santé, ces tabourets sont les incontournables de notre gamme. Ils sont dotés d'un support à roulettes à cinq pieds aluminium poli/noir avec protection et d'une manette ou d'une pédale (sur les modèles pneumatiques) de réglage de la hauteur. La hauteur du siège des modèles 274 (sans dossier) et 275 (avec dossier) se règle manuellement, tandis qu'elle se règle grâce à un système pneumatique sur les modèles 276 (sans dossier) et 277 (avec dossier). Les modèles 278 (pédale) et 279 (manette) sont équipés d'un réglage pneumatique et sont dotés d'accoudoirs permettant de stabiliser le bras du chirurgien lors d'interventions délicates.



427 - Tabouret de médecin avec système de levage pneumatique

Il présente les mêmes caractéristiques que le modèle 425, mais il est doté d'une pédale à la place de la manette. D'une simple pression du talon, réglez la hauteur de votre tabouret grâce à la pédale tout en assurant le maintien du champ stérile. Sur l'illustration, le modèle 427 est doté d'un dossier et d'accoudoirs à inclinaison et hauteur réglables.



425 - Tabouret de médecin avec système de levage pneumatique

Ergonomique, le modèle 425 est composé d'un siège enveloppant qui s'adapte à la forme du corps, ce qui en fait le tabouret le plus confortable du marché. Tirez simplement sur la manette afin d'ajuster la hauteur du tabouret et trouver rapidement votre position de travail. Les protections en plastique dissimulent la structure en acier et le support à roulettes pour une apparence plus esthétique. Avec les modèles 425 et 427, les attentes des professionnels de la santé sont plus que satisfaites.



Tabourets série Value

Version économique de la série Classic, ces tabourets garantissent fiabilité et style. Cette gamme propose un support à roulettes à cinq pieds en composite plastique avec protection et d'un levier de réglage de la hauteur sur les modèles pneumatiques. La hauteur du siège des modèles 270 (sans dossier) et 271 (avec dossier) se règle manuellement, tandis qu'elle se règle grâce à un système pneumatique sur les modèles 272 (sans dossier) et 273 (avec dossier).



680 - Fauteuil d'appoint

Doux et confortable, ce siège est conçu pour les salles d'examen, les salles d'attente et l'accueil. Le modèle 680 dispose d'un grand nombre d'atouts : dossier et assise enveloppants pour un soutien renforcé, structure robuste en acier avec revêtement poudre noir et pieds de nivellement pour plus de stabilité. La forme des pieds arrière a été spécialement conçue de manière à rapprocher le fauteuil du mur sans l'endommager. Disponible avec ou sans accoudoirs en plastique haute résistance.



281 - Fauteuil de prélèvement

Le dossier et les accoudoirs de ce fauteuil sont légèrement inclinés et ajustables pour garantir le confort et la sécurité du patient. Les accoudoirs sont dotés de mécanismes de dégagement rapide pour un réglage simple et efficace de la hauteur et de l'inclinaison. Le modèle 281 peut être équipé d'un tiroir, idéal pour le rangement du matériel et pour un gain de place.



Tabourets et fauteuils

SPÉCIFICATIONS

Tabourets série Classic

Hauteur d'assise :
45,7 à 62,2 cm (18" à 24,5")
(274-278)
48,3 à 64,8 cm (19" à 25,5") (279)
Diamètre de l'assise :
40,6 cm (16,25")
Épaisseur du coussin de l'assise :
8,25 cm (3,25")
Dimensions du coussin du dossier :
35,6 cm l x 19 cm H (14" l x 7,5" H)
(275, 277)
Diamètre du support à roulettes :
56,6 cm (21,5")
Capacité de poids :
159 kg (350 lb) (274, 276)
102 kg (225 lb) (275, 277, 278, 279)

Tabourets série Value

Hauteur d'assise :
45,7 à 62,2 cm (18" à 24,5")
(270-273)
Diamètre de l'assise :
40,6 cm (16,25")
Épaisseur du coussin de l'assise :
8,25 cm (3,25")
Dimensions du coussin du dossier :
35,6 cm l x 19 cm H (14" l x 7,5" H)
(271, 273)
Diamètre du support à roulettes :
58,4 cm (23")
Capacité de poids :
136 kg (300 lb) (270, 272)
102 kg (225 lb) (271, 273)

Options sur les séries Classic et Value

Roulettes de blocage
Roulettes en caoutchouc souple
Patins
15 cm (6") de hauteur
supplémentaire pour laboratoire
Anneau repose-pieds

425/427 - Tabourets de médecin avec système de levage pneumatique

Hauteur d'assise :
44,4 à 61 cm (17,5" à 24") (425)
43,2 à 58,4 cm (17" à 23") (427)
Dimensions du coussin de l'assise :
41,9 cm l x 43,2 cm P
(16,5" l x 17" P)
Épaisseur du coussin de l'assise :
7,6 cm (3")
Dimensions du coussin du dossier :
33 cm x 24,1 cm (13" l x 9,5" H)
(avec dossier)
Diamètre du support à roulettes :
58,4 cm (23")
Capacité de poids : 102 kg (225 lb)


281 - Fauteuil de prélèvement

Hauteur d'assise : 50,8 cm (20")
Dimensions du coussin de l'assise :
50,8 cm l x 41,9 cm P (20" l x 16,5" P)
Épaisseur du coussin de l'assise :
5 cm (2")
Dimensions du coussin du dossier :
50,8 cm l x 41,9 cm H
(20" l x 16,5" H)
Largeur entre les accoudoirs
intérieurs : 53,3 cm (21")
Largeur entre les accoudoirs
extérieurs : 81,3 cm (32")
Capacité de stockage du tiroir :
21,6 cm l x 38,7 cm P x 11,4 cm H
(8,5" l x 15,25" P x 4,5" H)
Capacité de poids : 181 kg (400 lb)

680 - Fauteuil d'appoint

Hauteur d'assise : 43,2 cm (17")
Dimensions du coussin de l'assise :
45,7 cm l x 49,5 cm P (18" l x 19,5" P)
Épaisseur du coussin de l'assise :
5 cm (2")
Dimensions du coussin du dossier :
45,7 cm l x 34,3 cm H
(18" l x 13,5" H)
Largeur entre les accoudoirs
intérieurs : 44,4 cm (17,5")
(modèles avec accoudoirs)
Largeur entre les accoudoirs
extérieurs : 59,7 cm (23,5")
(modèles avec accoudoirs)
Capacité de poids : 181 kg (400 lb)


Coloris de la garniture :

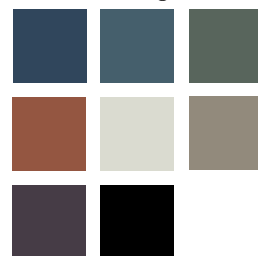

Ritter : Marine, bleu poudre,
vert mousse, argile, gris galet,
ombre, prune et noir



Coloris unis Midmark Premium :
Myrtille, argent sauge, vert thé,
gris fossile, bleu cachemire,
terracotta et noir

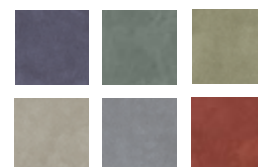

Motifs Midmark Premium :
Bellagio, Sienne, Toscane,
Florence, Capri et Trévise



Midmark Ultra-Premium :
Bleu Pacifique Ultra, épicea
Ultra, olivine Ultra, arctique
Ultra, ciel Ultra, canyon Ultra et
aile de corbeau Ultra

*Des frais supplémentaires sont à prévoir
sur la gamme Midmark Ultra-Premium.

**Midmark est une société
certifiée ISO 13485 et
ISO 9001.**

Pour de plus amples informations
ou une démonstration, contactez
votre revendeur Midmark ou
Midmark Corporation,
Versailles, Ohio.
Téléphone : 1-800-MIDMARK
Fax : 1-800-365-8631
midmark.com



Dossier (séries Classic
et Value)



Patins (série Classic)



Patins (série Value)



Roulettes de blocage
(séries Classic et Value)



Roulettes en caoutchouc
souple (série Classic)



Roulettes en caoutchouc
souple (série Value)



Le modèle 277 de la série
Classic est illustré avec
15 cm (6") de hauteur
supplémentaire (laboratoire)
et d'un anneau repose-pieds.

Ritter[®]
by MIDMARK

© Midmark Corporation 2005
Midmark Corporation, Dayton, OH.
Produits susceptibles de subir des modifications
d'amélioration sans préavis.
Litho aux États-Unis 007-0558-02 Rév. E1 (8/16)