


# Tabourets et fauteuils

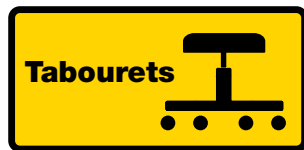

## Une conception et une fabrication qui dépasseront vos attentes

Le large support à roulettes à cinq pieds garantit un soutien et une stabilité accrue, grâce à sa forme d'étoile permettant un meilleur accès au patient. Les doubles roulettes à capuchon robustes permettent un déplacement discret du tabouret sur tous les types de surfaces.

Les modèles manuels sont dotés d'une vis d'assemblage robuste en acier et les modèles pneumatiques d'un cylindre pneumatique pour un renforcement de la solidité et de la stabilité des tabourets. Le cylindre pneumatique a une fonction d'amortisseur intégré pour vous protéger des chocs tout au long de la journée. Il s'agit d'un système simple et efficace pour le réglage de la hauteur du siège (idéal pour les interventions médicales groupées).

La largeur d'assise et la densité du rembourrage en mousse offrent un confort optimal. Les coutures de la garniture sont lissées pour éviter l'apparition de marques sur les jambes. Optez pour un siège à dossier afin d'améliorer votre posture et assurer un meilleur soutien pour moins de fatigue à la fin de la journée.

Nous vous proposons un vaste choix de couleurs et d'accessoires pour que vous trouviez facilement le tabouret qui vous convient le mieux.

## Tabourets série Classic

Produits phares dans de nombreux établissements de santé, ces tabourets sont les incontournables de notre gamme. Ils sont dotés d'un support à roulettes à cinq pieds en aluminium poli/noir avec protection avec une manette ou d'une pédale (sur les modèles pneumatiques) de réglage de la hauteur. La hauteur du siège des modèles 274 (sans dossier) et 275 (avec dossier) se règle manuellement, tandis qu'elle se règle grâce à un système pneumatique sur les modèles 276 (sans dossier) et 277 (avec dossier). Les modèles 278 (pédale) et 279 (manette) sont équipés d'un réglage de la hauteur pneumatique et sont dotés d'accoudoirs permettant de stabiliser le bras du médecin lors d'interventions délicates.



## 425 - Tabouret de médecin avec système de levage pneumatique

Ergonomique, le modèle 425 est composé d'un siège enveloppant qui s'adapte à la forme du corps, ce qui en fait le tabouret le plus confortable du marché. Tirez simplement sur la manette afin de régler pneumatiquement la hauteur du tabouret et trouver facilement et rapidement la hauteur de travail la plus confortable. Les protections en plastique dissimulent la structure en acier et le support à roulettes à cinq pieds pour une apparence plus esthétique.



## 427 - Tabouret de médecin avec système de levage pneumatique

Il présente les mêmes caractéristiques que le modèle 425, mais il est doté d'une pédale à la place de la manette. D'une simple pression du talon, réglez la hauteur de votre tabouret grâce à la pédale tout en assurant le maintien du champ stérile. Sur l'illustration, le modèle 427 est doté d'un dossier en option avec réglages en avant/arrière et vers le haut/bas et d'accoudoirs en option avec réglages et pivotement vers l'intérieur/extérieur.



## 276 - Tabouret avec système de levage pneumatique

Notre tabouret le plus vendu, le 276, est devenu le tabouret standard du secteur dans les établissements de santé.



## 680 - Fauteuil d'appoint

Doux et confortable, ce siège est conçu pour les salles d'examen, les salles d'attente et l'accueil. Le modèle 680 dispose d'un grand nombre d'atouts : dossier et assise enveloppants pour un soutien renforcé ; structure robuste en acier avec revêtement poudre noir et pieds de nivellement pour plus de stabilité ; forme des pieds arrière spécialement conçue de manière à rapprocher le fauteuil du mur sans l'endommager. Disponible avec ou sans accoudoirs en plastique haute résistance.



## 281 - Fauteuil de prélèvement sanguin

Le dossier et les accoudoirs de ce fauteuil sont légèrement inclinés et ajustables pour garantir le confort et la sécurité du patient. Les accoudoirs sont dotés de mécanismes de dégagement rapide pour un réglage simple et efficace de la hauteur et de l'angle de pivotement vers l'intérieur/extérieur. Le modèle 281 peut être équipé d'un tiroir, idéal pour le rangement du matériel et pour un gain de place.



## Tabourets série Value

Version économique de la série Classic, ces tabourets garantissent fiabilité et style. Cette gamme propose un support à roulettes à cinq pieds en composite plastique avec protection et un seul levier de réglage de la hauteur sur les modèles pneumatiques. La hauteur du siège des modèles 270 (sans dossier) et 271 (avec dossier) se règle manuellement, tandis qu'elle se règle grâce à un système pneumatique sur les modèles 272 (sans dossier) et 273 (avec dossier).





Vous méritez de travailler confortablement. Notre gamme de sièges est à votre disposition pour répondre à vos attentes.

Au quotidien, votre profession vous amène à travailler assis et debout. Votre assise doit donc vous apporter confort et soutien. Notre gamme de sièges vous propose un vaste choix de sièges rembourrés à large assise pour un confort optimal et une structure à base solide pour une excellente stabilité.

Depuis plus de 50 ans, Ritter fournit des produits de qualité aux professionnels de santé et est considéré comme l'un des chefs de file du secteur. Notre marque propose une gamme de sièges conçus pour durer.

Créez une atmosphère chaleureuse et accueillante pour votre personnel et vos patients en choisissant de vous équiper avec les tables et les meubles de rangement Ritter et Midmark.



## Tabourets et fauteuils

### S P É C I F I C A T I O N S

#### Tabourets série Classic

Hauteur d'assise : 45,7 à 62,2 cm (18" à 24,5") (274-278)  
48,3 à 64,8 cm (19" à 25,5") (279)  
Diamètre d'assise : 41,3 cm (16,25")  
Épaisseur du coussin de l'assise : 8,2 cm (3,25")  
Dimensions du coussin du dossier : 35,6 cm l x 19 cm H (14" x 7,5") (275, 277)  
Diamètre du support à roulettes : 54,6 cm (21,5")  
Capacité de poids : 159 kg (350 lb) (274, 276) 102 kg (225 lb) (275, 277, 278, 279)

#### Tabourets série Value

Hauteur d'assise : 45,7 à 62,2 cm (18" à 24,5") (270-273)  
Diamètre d'assise : 41,3 cm (16,25")  
Épaisseur du coussin de l'assise : 8,2 cm (3,25")  
Dimensions du coussin du dossier : 35,6 cm l x 19 cm H (14" x 7,5") (271, 273)  
Diamètre du support à roulettes : 58,4 cm (23")  
Capacité de poids : 136 kg (300 lb) (270, 272) 102 kg (225 lb) (271, 273)

#### Options sur les séries Classic et Value

Roulettes de blocage  
Roulettes en caoutchouc souple  
Patins  
15 cm (6") de hauteur supplémentaire pour laboratoire  
Anneau repose-pieds

#### 425/427 - Tabourets de médecin avec système de levage pneumatique

Hauteur d'assise : 44,4 à 61 cm (17,5" à 24") (425) 43,2 à 58,4 cm (17" à 23") (427)  
Dimensions du coussin de l'assise : 41,9 cm l x 43,2 cm P (16,5" x 17")  
Épaisseur du coussin de l'assise : 7,6 cm (3")  
Dimensions du coussin du dossier : 33 cm l x 24,1 cm H (13" x 9,5") (avec dossier)  
Diamètre du support à roulettes : 58,4 cm (23")  
Capacité de poids : 102 kg (225 lb)

#### 281 - Fauteuil de prélèvement sanguin

Hauteur d'assise : 50,8 cm (20")  
Dimensions du coussin de l'assise : 50,8 cm l x 41,9 cm P (20" x 16,5")  
Épaisseur du coussin de l'assise : 5 cm (2")  
Dimensions du coussin du dossier : 50,8 cm l x 41,9 cm H (20" x 16,5")  
Largeur entre les accoudoirs intérieurs : 53,3 cm (21")  
Largeur entre les accoudoirs extérieurs : 81,3 cm (32")  
Capacité de stockage du tiroir : 21,6 cm l x 38,7 cm P x 11,4 cm H (8,5" x 15,25" x 4,5")  
Capacité de poids : 181 kg (400 lb)

#### 680 - Fauteuil d'appoint

Hauteur d'assise : 43,2 cm (17")  
Dimensions du coussin de l'assise : 45,7 cm l x 49,5 cm P (18" x 19,5")  
Épaisseur du coussin de l'assise : 5 cm (2")  
Dimensions du coussin du dossier : 45,7 cm l x 34,3 cm H (18" x 13,5")  
Largeur entre les accoudoirs intérieurs : 44,4 cm (17,5") (modèles avec accoudoirs)  
Largeur entre les accoudoirs extérieurs : 59,7 cm (23,5") (modèles avec accoudoirs)  
Capacité de poids : 181 kg (400 lb)

#### Coloris standard de la garniture

- Brume-813
- Pierre-814
- Repos-858
- Fer-851
- Gris lunaire-845
- Obsidienne-857
- Oasis-843
- Bleu apaisant-855
- Rêve-847
- Minéral-844
- Eau bienfaisante-848
- Jardin ombragé-853
- Agrume-849
- Sable-850
- Cuivre curatif-846
- Airelle-859
- Lin foncé-856
- Latte-860
- Brun profond-852
- Terre profonde-854

#### Coloris de la garniture UltraFree®

- Pierre UltraFree-865
- Repos UltraFree-868
- Obsidienne UltraFree-867
- Havre UltraFree-861
- Agropyre UltraFree-862
- Épices UltraFree-863
- Airelle UltraFree-869
- Lin foncé UltraFree-866
- Latte UltraFree-870
- Branche UltraFree-864

#### ULTRALEATHER® par Ultrafabrics

Midmark est une société certifiée ISO 13485 et ISO 9001.

Pour de plus amples informations ou une démonstration, contactez votre revendeur Midmark ou Midmark Corporation, Dayton, Ohio.  
Téléphone : 1-800-MIDMARK  
Fax : 1-800-365-8631  
midmark.com



Dossier (séries Classic et Value)



Patins (série Classic)



Patins (série Value)



Roulettes de blocage (séries Classic et Value)



Roulettes en caoutchouc souple (série Classic)



Roulettes en caoutchouc souple (série Value)



Le modèle 277 de la série Classic est illustré avec 15 cm (6") de hauteur supplémentaire (laboratoire) et d'un anneau repose-pieds.

Ritter®  
by MIDMARK

© Midmark Corporation 2005  
Midmark Corporation, Dayton, OH.  
Produits susceptibles de subir des modifications d'amélioration sans préavis.  
Litho aux États-Unis 007-0558-02 Rév. F1 (1/18)

## Tabourets et fauteuils



Ritter®  
by MIDMARK