



Deje que
nuestros asientos
le proporcionen
la comodidad y
el apoyo que
se merece.

Con jornadas tan ajetreadas como las suyas, lo que más necesita en un asiento es comodidad y soporte. Nuestros productos ofrecen asientos amplios y acolchados para una mayor comodidad, mientras que la estructura de base sólida proporciona una estabilidad perfecta.

La marca Ritter lleva más de 50 años ofreciendo productos de calidad para el sector sanitario y goza del reconocimiento como líder del sector: nuestros asientos son resistentes y están fabricados teniendo en cuenta la durabilidad.

Coordinar sus salas con mesas y mobiliario Ritter y Midmark les dará un aspecto cálido y acogedor que el personal y los pacientes sabrán reconocer y apreciar.



Taburetes y sillas



Diseñados y fabricados para superar sus expectativas

Para empezar, cuentan con una base con ruedas de cinco patas que proporciona apoyo y estabilidad. La forma de estrella de la base permite acercarse más al paciente, mientras que las robustas ruedas dobles con cubierta permiten que los taburetes maniobren silenciosamente por todo tipo de superficies.

Un elemento que añade aún más robustez y estabilidad a nuestros taburetes es el tornillo mecánico en acero macizo en los modelos manuales o el cilindro neumático en los modelos neumáticos. Además, el cilindro neumático actúa como un amortiguador integrado, absorbiendo el desgaste de un día de trabajo duro por usted, y ofrece un método sencillo y eficaz para ajustar la altura del asiento (ideal para consultas con varios médicos).

La comodidad está asegurada con un asiento amplio y suficientemente acolchado de espuma densa. La costura sin nervaduras de la tapicería evita que el borde del asiento se clave en las piernas. A todo ello hay que añadir un respaldo que mejora la postura y ofrece un mayor soporte para que se sienta menos cansado al final del día.

Con la amplia selección de opciones, colores y accesorios disponibles, seguro que encontrará el taburete más adecuado para usted.

Taburete neumático 276

Nuestro taburete más vendido. El modelo 276 se ha convertido en un estándar del sector en las instalaciones sanitarias.



Taburetes de la serie Classic

Los taburetes más demandados del sector sanitario y la base de nuestra línea de asientos. La serie Classic presenta una base con ruedas de cinco patas y cubierta de aluminio pulido con detalles en negro y un control de altura mediante palanca manual o pedal en los modelos neumáticos. La altura del asiento de los modelos 274 (sin respaldo) y 275 (con respaldo) se ajusta de forma manual, mientras que en los modelos 276 (sin respaldo) y 277 (con respaldo) se ajusta de forma neumática. Los modelos 278 (con pedal) y 279 (con palanca manual) ofrecen un ajuste de altura neumático y un reposabrazos quirúrgico para estabilizar el brazo del cirujano durante intervenciones delicadas.



Taburete neumático de médico 427

Presenta las mismas características que el 425, pero con un pedal en lugar de una palanca manual. La altura se puede ajustar de forma neumática con solo un toque de talón en el pedal, lo que permite mantener el entorno esterilizado. El modelo 427 se muestra aquí con el kit de respaldo opcional, que se puede ajustar hacia dentro, hacia fuera, hacia arriba y hacia abajo; y con el kit de reposabrazos opcional, que se ajusta hacia dentro, hacia fuera y en ángulo.



Taburete neumático de médico 425

El diseño ergonómico del modelo 425 presenta un asiento de bordes redondeados que se adapta a la forma de su cuerpo, lo que lo convierte en el taburete más cómodo que habrá probado en toda su vida. La altura se puede regular de forma neumática con un simple movimiento de la palanca manual, lo que permite encontrar la altura de trabajo más cómoda de manera eficaz y sin esfuerzo. Los recubrimientos de plástico ocultan las subestructuras de acero y cubren la base con ruedas de cinco patas para proporcionar un aspecto más estético y cálido. Los modelos 425 y 427 redefinen las expectativas de los profesionales sanitarios.



Taburetes de la serie Value

Una versión más económica de los populares taburetes de la serie Classic sin sacrificar la fiabilidad ni el estilo. La serie Value presenta una base con ruedas de cinco patas y cubierta de compuesto plástico, así como un control de altura mediante palanca simple en los modelos neumáticos. La altura del asiento de los modelos 270 (sin respaldo) y 271 (con respaldo) se ajusta de forma manual, mientras que en los modelos 272 (sin respaldo) y 273 (con respaldo) se ajusta de forma neumática.



Silla auxiliar 680

Un asiento agradable y cómodo para los pacientes en la sala de reconocimiento, la sala de espera y la recepción. La silla 680 incluye todos los extras: asiento y respaldo con bordes redondeados para ofrecer un soporte adicional; estructura robusta de tubo de acero con acabado de pintura en polvo de color negro y pies de apoyo para una mayor estabilidad, y un diseño salvaparedes de las patas traseras, inclinadas hacia atrás para que la silla pueda estar pegada a la pared sin dañarla. Disponible con o sin reposabrazos de plástico extrarresistente.



Silla para extracción de sangre 281

El respaldo ligeramente inclinado y los reposabrazos regulables ofrecen comodidad y seguridad al paciente. Los reposabrazos están equipados con mecanismos de apertura rápida para poder regular de forma sencilla y eficaz su altura e inclinación hacia dentro o hacia fuera. La silla 281 está disponible con un cajón, que resulta perfecto para guardar suministros y para proporcionar una superficie de trabajo adicional.



Taburetes y sillas

ESPECIFICACIONES

Taburetes de la serie Classic

Altura del asiento:
45,7 - 62,2 cm (18" - 24,5")
(modelos 274-278)
48,3 - 64,8 cm (19" - 25,5")
(modelo 279)

Diámetro del asiento:
41,3 cm (16,25")

Grosor del cojín del asiento:
8,25 cm (3,25")

Dimensiones del cojín del respaldo:
35,5 cm de ancho x 19 cm de alto
(14" x 7,5") (modelos 275, 277)

Diámetro de la base con ruedas:
54,6 cm (21,5")

Peso máximo de carga:
159 kg (350 lb) (modelos 274, 276)
102 kg (225 lb) (modelos 275, 277,
278, 279)

Taburetes de la serie Value

Altura del asiento:
45,7 - 62,2 cm (18" - 24,5")
(modelos 270-273)

Diámetro del asiento:
41,3 cm (16,25")

Grosor del cojín del asiento:
8,25 cm (3,25")

Dimensiones del cojín del respaldo:
35,5 cm de ancho x 19 cm de alto
(14" x 7,5") (modelos 271, 273)

Diámetro de la base con ruedas:
58,4 cm (23")

Peso máximo de carga:
136 kg (300 lb) (modelos 270, 272)
102 kg (225 lb) (modelos 271, 273)

Opciones de las series Classic y Value

Ruedas bloqueables

Ruedas de goma blanda

Pies deslizantes

Extensión de altura para laboratorio
de 15,24 cm (6")

Reposapiés circular

Taburetes neumáticos de médico 425/427

Altura del asiento:
44,5 - 61 cm (17,5" - 24")
(modelo 425)

43,2 - 58,4 cm (17" - 23")
(modelo 427)

Dimensiones del cojín del asiento:
41,3 cm de ancho x 43,2 cm de
profundidad (16,5" x 17")

Grosor del cojín del asiento:
7,6 cm (3")

Dimensiones del cojín del respaldo:
33 cm de ancho x 24,1 cm de alto
(13" x 9,5") (con el accesorio de
respaldo)

Diámetro de la base con ruedas:
58,4 cm (23")

Peso máximo de carga: 102 kg
(225 lb)

Silla para extracción de sangre 281

Altura del asiento: 50,8 cm (20")

Dimensiones del cojín del asiento:
50,8 cm de ancho x 41,3 cm de
profundidad (20" x 16,5")

Grosor del cojín del asiento: 5 cm (2")

Dimensiones del cojín del respaldo:
50,8 cm de ancho x 41,3 cm de altura
(20" x 16,5")

Anchura interior del reposabrazos:
53,3 cm (21")

Anchura exterior del reposabrazos: 81
cm (32")

Capacidad del cajón de
almacenamiento:

21,6 cm de ancho x 38,7 cm de
profundidad x 11,4 cm de alto
(8,5" x 15,25" x 4,5")

Peso máximo de carga: 182 kg
(400 lb)

Silla auxiliar 680

Altura del asiento: 43,2 cm (17")

Dimensiones del cojín del asiento:
45,7 cm de ancho x 49,5 cm de
profundidad (18" x 19,5")

Grosor del cojín del asiento: 5 cm (2")

Dimensiones del cojín del respaldo:
45,7 cm de ancho x 34,3 cm de alto
(18" x 13,5")

Anchura interior del reposabrazos:
44,5 cm (17,5") (en el modelo con
reposabrazos)

Anchura exterior del reposabrazos:
59,7 cm (23,5") (en el modelo con
reposabrazos)

Peso máximo de carga: 182 kg (400 lb)

Colores de la tapicería:




Ritter: Azul marino, azul
grisáceo, musgo, arcilla,
gris guijarro, gris sombra,
berenjena y negro.



Midmark Premium lisa:
Arándano, salvia, té verde,
gris fósil, azul de cachemira,
terracota y negro.



Midmark Premium
estampada: Belagio, Siena,
Toscana, Firenze, Capri y
Treviso.

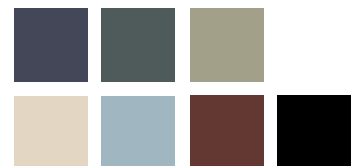

Midmark Ultra-Premium:
Azul pacífico ultra, píceo
ultra, olivino ultra, ártico
ultra, celeste ultra, cañón
ultra y ala de cuervo ultra.

*Los colores Midmark Ultra-
Premium conllevan un cargo
adicional.

**Midmark es una empresa
certificada según las normas
ISO 13485 e ISO 9001.**

Si desea más información o una
demostración, póngase en contacto
con su distribuidor de Midmark
o con Midmark Corporation en
Versailles, Ohio.

Tel.: 1-800-MIDMARK

Fax: 1-800-365-8631

midmark.com

© Midmark Corporation 2005

Midmark Corporation, Dayton, Ohio (EE. UU.).

Como parte del proceso de mejora podrían realizarse
cambios en los productos sin previo aviso.

Impreso en los Estados Unidos. 007-0558-03 Rev. E1 (8/16)



Respaldo de las series
Classic y Value



Pies deslizantes de la
serie Classic



Pies deslizantes de la
serie Value



Ruedas bloqueables de
las series Classic y Value



Ruedas de goma blanda
de la serie Classic



Ruedas de goma blanda
de la serie Value



La serie Classic 277
con las opciones de
extensión de altura
de 15,24 cm (6") y
reposapiés circular.

Ritter®
by MIDMARK