



Le Midmark PowerVac G offre une gestion de l'énergie à la demande qui crée une nouvelle norme pour les aspirateurs dentaires. De nombreux aspirateurs fonctionnent à plein régime, quelle que soit la demande. Le PowerVac G augmente automatiquement la vitesse de la pompe pour répondre à la demande, vous donnant exactement l'aspiration dont vous avez besoin, ni plus ni moins, et réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 83 %.

Caractéristiques :

- Mêmes avantages que le PowerVac, mais avec un meilleur rendement énergétique
- Conception sans huile et sans eau
- Fonctionnement silencieux
- Conception compacte qui utilise un espace au sol similaire à celui des aspirateurs à anneau liquide conventionnels
- Haute performance constante - jusqu'à 18 po Hg
- Peut remplacer de nombreux types de technologies d'aspiration existantes, quelle que soit la configuration de la plomberie
- Flexibilité évolutive – peut accueillir de 1 à 20 utilisateurs
- Garantie sur le produit inégalée - garantie complète de 5 ans/10 000 heures sur le produit et de 10 ans/20 000 heures sur la pompe

PowerVac G – La nouvelle génération d'aspirateurs de cabinet dentaires


- 01** Le puissant moteur de 3 HP peut répondre aux besoins d'aspiration de 10 utilisateurs simultanément.
- 02** Le panneau de commande vous permet de sélectionner facilement le niveau d'aspiration qui répond à vos besoins.
- 03** Le séparateur à grand volume offre les performances exigées par la plupart des cabinets.

Rendement :

- Utilise jusqu'à 83 % moins d'électricité que les systèmes concurrents
- Réduit jusqu'à 30 % les émissions de chaleur dans l'ensemble
- 33 % plus silencieux que les aspirateurs à sec de taille similaire

Le PowerVac G combine des performances de pointe avec un système écologique, économe en énergie et sans eau.

Coûts d'exploitation au fil du temps*

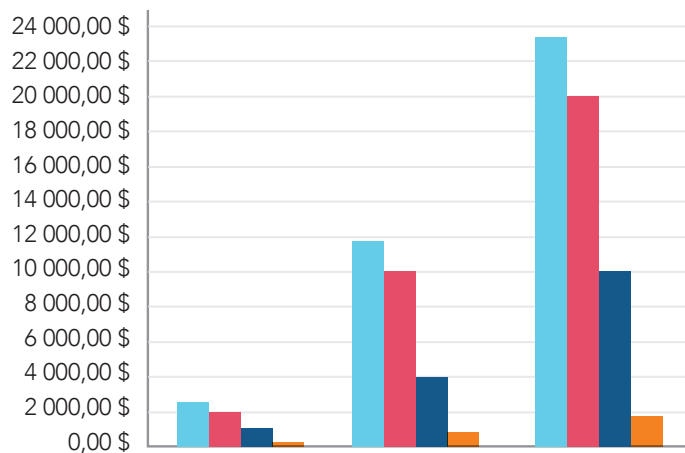


Coût par an 1 an 5 ans 10 ans

■ Aspirateur à anneau liquide ■ Aspirateur à sec
 ■ Aspirateur à anneau liquide avec recycleur ■ PowerVac G

* 2 000 heures/an avec pompe jumelle de 1 HP. Coûts de l'eau, de l'électricité et des articles d'entretien inclus.

Comparaison du niveau sonore

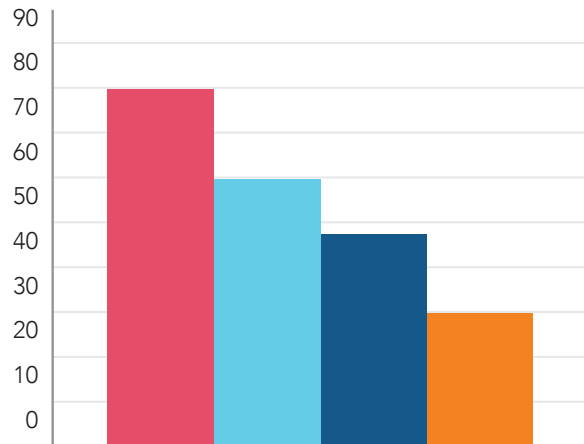

Niveaux sonores – dB

■ Réveil-matin ■ PowerVac G
 ■ Conversation normale ■ Bibliothèque silencieuse

SPÉCIFICATIONS DU MIDMARK POWERVAC G

Modèle/N° de commande	G3 (SIMPLE)	G5 (SIMPLE)	G6 (POMPE JUMELLE)	G7 (SIMPLE)	G10 (POMPE JUMELLE)	G14 (POMPE JUMELLE)
Nombre d'utilisateurs	3 à 5	5 à 7	6 à 10	7 à 10	10 à 14	14 à 20
Nombre d'aspirateurs	1	1	2	1	2	2
Puissance totale	3	3	6	3	6	6
Aspiration (po Hg)	jusqu'à 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18
Tension	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz
Intensité totale	20	20	20 x 2	20	20 x 2	20 x 2
Ampères de disjoncteur	30	30	30 x 2	30	30 x 2	30 x 2
Dimensions hors tout : H x L x P	149,9 cm x 55,9 cm x 55,9 cm (59 po x 22 po x 22 po)	149,9 cm x 55,9 cm x 55,9 cm (59 po x 22 po x 22 po)	149,9 cm x 142,2 cm x 55,9 cm (59 x 56 x 22 po)	149,9 cm x 55,9 cm x 55,9 cm (59 po x 22 po x 22 po)	149,9 cm x 142,2 cm x 55,9 cm (59 x 56 x 22 po)	149,9 cm x 142,2 cm x 55,9 cm (59 x 56 x 22 po)
Base : H x L x P Réservoir : H x L x P	63,5 x 55,88 x 50,8 cm (25 x 22 x 20 po) 86,4 x 55,88 x 55,88 cm (34 x 22 x 22 po)	63,5 x 55,88 x 50,8 cm (25 x 22 x 20 po) 86,4 x 55,88 x 55,88 cm (34 x 22 x 22 po)	63,5 x 55,88 x 50,8 cm (25 x 22 x 20 po) chaque 86,4 x 55,88 x 55,88 cm (34 x 22 x 22 po) chaque	63,5 x 55,88 x 50,8 cm (25 x 22 x 20 po) 86,4 x 55,88 x 55,88 cm (34 x 22 x 22 po)	63,5 x 55,88 x 50,8 cm (25 x 22 x 20 po) chaque 86,4 x 55,88 x 55,88 cm (34 x 22 x 22 po) chaque	63,5 x 55,88 x 50,8 cm (25 x 22 x 20 po) chaque 86,4 x 55,88 x 55,88 cm (34 x 22 x 22 po) chaque
Poids d'expédition	Base – 431 lb Réservoir – 90 lb	Base – 431 lb Réservoir – 90 lb	Base – 431 lb x 2 Réservoir – 90 lb x 2	Base – 431 lb Réservoir – 90 lb	Base – 431 lb x 2 Réservoir – 90 lb x 2	Base – 431 lb x 2 Réservoir – 90 lb x 2



01



02

Accessoires

01 Le nettoyant pour système d'évacuation Precision Clense Plus garde votre aspirateur parfaitement propre, naturellement désinfecté et désodorisé.

02 Le séparateur d'amalgame Solmetex NXT Hg5® est certifié ISO 11143:2008 pour une séparation supérieure à 95 % et répond à toutes les exigences de la « EPA Dental Rule ».