

¿Qué es para usted un producto de valor?

“Para mí, un producto de valor es un equipo de calidad que me ayude a ayudar a mis pacientes. Las camillas de exploración Ritter son exactamente lo que necesito. No solo tienen una excelente relación calidad-precio, sino que duran años en perfectas condiciones. Las camillas de exploración Ritter nos facilitan el trabajo a mí y a mis empleados”.

Ritter 204

E S P E C I F I C A C I O N E S



*Cobertura con tapicería UltraFree sin costuras
La cobertura con tapicería UltraFree sin costuras ofrece una opción cómoda y fácil de limpiar para su consulta y el material no contiene PVC.*

Camilla de exploración manual Ritter 204

Especificaciones

Altura con la tapicería:

Cubierta de tacto suave:
81,6 cm (32,13")

Cubierta sin costuras:
84,2 cm (33,13")

Peso máximo del paciente:
226,8 kg (500 lb)

Receptáculo eléctrico

(115 VAC 5 A máx.)
(230 VAC 2,5 A máx.)

Dúplex, receptáculo eléctrico de grado hospitalario en el lado izquierdo

Cubierta con tapicería de tacto suave:

77,5 cm x 142,5 cm
(30,5" x 56")

Portarrollos de papel: admite rollos de papel de 53,3 cm x 12 cm (21" x 4,75")

Longitud con el reposapiés extendido: 187,3 cm (73,75")

Cubierta con tapicería sin costuras: 72,4 cm de largo x 151,1 cm de ancho (28,5" x 59,5")

Portarrollos de papel: admite rollos de papel de 53,3 cm x 8,9 cm (21" x 3,5")

Longitud con el reposapiés extendido: 193 cm (76")

Cubierta con tapicería UltraFree:
Especificaciones por venir ...

Opciones

Opciones de tapicería de tacto suave sin costuras o UltraFree sin costuras

Inclinación pélvica
(1,5 grados o 7 grados)

Calefactor de cajón (45 W) *

Accesorios

Apoyos para las rodillas

Bandeja de drenaje para la parte inferior del cuerpo

Bandeja de acero inoxidable

Agarraderas auxiliares

Sistema de reposabrazos ajustable

Tapicería ortopédica lisa

Especificaciones eléctricas

115 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A
(con receptáculo)

115 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A
(con calefactor de cajón)

230 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A
(con receptáculo)

Normas de seguridad UL
60601-1 y Can/CSA 601.1-M90

* No está a la venta en Europa.

Colores de tapicería estándar

- Niebla-813
- Piedra-814
- Camino tranquilo-858
- Mineral de hierro-851
- Gris lunar-845
- Obsidiana-857
- Oasis-843
- Azul relajante-855
- Sueño-847
- Mineral-844
- Aguas curativas-848
- Jardín sombreado-853
- Cítrico-849
- Retiro en la arena-850
- Cobre sanador-846
- Arándano-859
- Lino oscuro-856
- Café con leche-860
- Marrón oscuro-852
- Profundidades de la tierra-854

Colores de tapicería UltraFree*

- Piedra UltraFree-865
- Camino tranquilo UltraFree-868
- Obsidiana UltraFree-867
- Puerto UltraFree-861
- Hierba de trigo UltraFree-862
- Especias UltraFree-863
- Arándano UltraFree-869
- Lino oscuro UltraFree-866
- Café con leche UltraFree-870
- Rama UltraFree-864

*ULTRALEATHER® por Ultrafabrics

CE

Cumple la norma CARB 93120.2
Fase 2. Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001.

Si desea más información o una demostración, póngase en contacto con su distribuidor de Midmark o Midmark Corporation, Dayton, Ohio (EE. UU.).
Tel.: 1-800-MIDMARK
Fax: 1-800-365-8631
midmark.com

Representante autorizado para la CE
Los países de la CE deberán dirigir sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark para la CE señalado a continuación:

Midmark EMEA Ltd
Beech House, First Floor
East Wing, Ancells Business Park
Fleet, Hampshire,
GU51 2UN Reino Unido
Tel.: + 44 (0) 1252 360 940
Fax: + 44 (0) 1252 360 941

© Midmark Corporation 2005
Midmark Corporation, Dayton, Ohio (EE. UU.).
Como parte del proceso de mejora podrían realizarse cambios en los productos sin previo aviso.
Impreso en los Estados Unidos 007-0560-03 Rev. J1 (1/18)

Ritter
by MIDMARK



Ritter
by MIDMARK

204 Camilla de exploración manual



La opinión de los expertos

¿Por qué Ritter es la marca de camillas de exploración más vendida del sector? Nuestro afán por investigar, estudiar y escuchar nos permite dar respuesta a sus necesidades y las de sus pacientes.

Lo que necesita es...

- tres cajones laterales para un óptimo manejo de los suministros
- un estilo moderno acorde con su consulta
- una cobertura de diseño moderno y ergonómico que ofrezca la máxima comodidad a sus pacientes
- mayor capacidad para soportar el peso de los pacientes hasta 226,8 kg (500 lb)

¿Qué solución le ofrecemos? Camilla de exploración manual Ritter 204: lo último en diseño, comodidad y funcionalidad.



Cajones de una sola pieza sin juntas
Diseñados con bordes redondeados, fáciles de limpiar y sin juntas, permiten drenar fluidos y mejoran el control de las infecciones.


Espaciosos cajones laterales: tres espaciosos cajones laterales que proporcionan gran capacidad de almacenamiento para batas, paños y otros objetos, lo que le permitirá organizar gran variedad de suministros, ya sean pequeños o de gran volumen. Además, los dos cajones delanteros le ofrecen fácil acceso al instrumental durante las exploraciones pélvicas.



Elegante y fácil de limpiar: la tapicería sin costuras es tan suave y cómoda como parece, lo que ayudará a sus pacientes a sentirse más relajados. Además, al no tener costuras no hay superficies donde puedan acumularse la suciedad y las bacterias, con lo que la limpieza es más fácil, rápida y eficaz.



Sistema de cubierta desmontable: la cubierta tapizada de una sola pieza se puede desmontar fácilmente sin herramientas, lo que facilita una limpieza minuciosa o un rápido cambio del color de la tapicería.

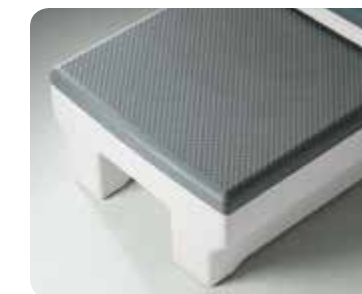

Peldaño ampliado: aumentamos el tamaño del peldaño más del 40 por ciento más que el estándar del sector. Está diseñado para que los pacientes se sientan más seguros y suban a la camilla con mayor confianza.



Acceso a suministros y volumen de almacenaje: nuestros cajones laterales de lado a lado permiten almacenar suministros y acceder a ellos desde ambos lados de la camilla, al tiempo que ofrecen la posibilidad de cambiar la distribución de la sala.

Accesorios que aportan comodidad



Agarraderas auxiliares
Permiten a los pacientes subirse a la camilla de exploración o cambiar de posición durante el examen médico de un modo seguro. Además, cuando sea necesario para facilitar el acceso del paciente, pueden desmontarse fácilmente y sin necesidad de herramientas.



Sistema de reposabrazos ajustable
Proporciona al paciente un apoyo estable al subirse a la camilla de exploración y una sensación de seguridad durante su traslado. Los brazos pueden girarse, fijarse en una de sus tres posiciones y desmontarse fácilmente.



Apoyos articulados para las rodillas
Una opción más ergonómica y cómoda que los estribos estándar. El diseño de articulación de bola ofrece la máxima flexibilidad a la hora de colocar al paciente.



Soporte de camilla IQvitals®
Práctico soporte de camilla para el aparato de monitorización de las constantes vitales Midmark IQvitals®, apto para todas las camillas de exploración Midmark y Ritter.



Tapicería lisa
Una excelente superficie de trabajo para uso ortopédico, quiropráctico u osteopático.



Lámpara LED para exploración Ritter 253
Concebida para ser el complemento perfecto en cualquier sala de intervenciones, la 253 incorpora opciones como controles de fácil acceso, luz de gran intensidad y punto focal regulable. Disponible en tres opciones de montaje.



Bandeja de drenaje para la parte inferior del cuerpo
Idónea para intervenciones urológicas u otros casos en los que deban eliminarse fluidos y restos.



Apoyos estándar para las rodillas
Proporcionan apoyo a las piernas durante procedimientos largos en los que el cansancio es un factor importante o cuando el paciente no tiene suficiente control de las piernas o fuerza en ellas. Pueden girarse para proporcionar apoyo a las piernas o las rodillas.



Todas las personas tienen derecho a recibir la misma atención.

Para cuidar verdaderamente de las personas, debe comprender las necesidades de sus pacientes hoy y mañana. Debido al envejecimiento de la población, cada vez más pacientes pueden necesitar ayuda para subir a una camilla de exploración. Con una altura mínima de 45,7 cm (18"), las camillas de exploración Barrier-Free® están diseñadas para facilitar la acomodación de todos los pacientes con dignidad, independientemente de sus posibles problemas de movilidad. Ayúdelos a ayudarse a sí mismos.