


ASPIRATEURS POWERMAX® HAUTE PERFORMANCE

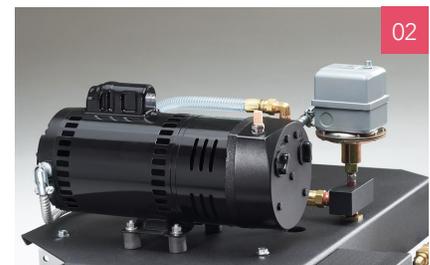

FAITES CONFIANCE À L'ASPIRATEUR DE CABINET DENTAIRE MIDMARK POWERMAX POUR UNE PUISSANCE, UNE EFFICACITÉ ET UNE FIABILITÉ MAXIMALES

Les aspirateurs Midmark PowerMax sont conçus pour satisfaire les besoins des spécialistes qui exigent les performances les plus élevées de leurs systèmes d'aspiration. Contrairement aux systèmes d'aspiration dentaire classiques qui doivent fonctionner en continu pour fournir une aspiration instantanée, le PowerMax ne fonctionne que lorsque la pression du réservoir d'alimentation est inférieure à la demande d'aspiration du fauteuil, ce qui permet d'économiser de l'électricité et de favoriser la longévité globale du système. Cet aspirateur est équipé de série d'une jauge de vide facile à lire, de pieds isolants pour les vibrations et d'un fonctionnement basse tension 24 V pour plus de commodité. Pour une valeur ajoutée, combinez l'aspirateur PowerMax avec l'ensemble de salle de réveil pour le confinement et la gestion des déchets de la cavité buccale dans la salle.

Caractéristiques :

- Puissance d'aspiration jusqu'à 21 po Hg
- Pompe à vide à palettes rotatives sans huile offrant une fiabilité exceptionnelle
- Réservoir d'alimentation sous vide certifié ASME
- Garantie sur le produit de 2 ans

01 Les aspirateurs PowerMax sont conçus pour partager les mêmes commandes électriques faciles d'accès que tous les autres systèmes d'aspiration et de compresseur Midmark.

02 Les aspirateurs PowerMax produisent une aspiration de haute performance jusqu'à 21 po Hg.

03 Les aspirateurs PowerMax sont équipés d'un compteur d'heures pour évaluer les heures de fonctionnement et faciliter l'entretien et la garantie du produit.

SPÉCIFICATIONS DE POWERMAX

Modèle/N° de commande	PM-1	PM-3	PM-4
Puissance	1 à 3/4 HP	2 à 3/4 HP	3 à 3/4 HP
Taille (H x L x P)	78,7 x 81,3 x 63,5 cm (31 x 32 x 25 po)	78,7 x 81,3 x 63,5 cm (31 x 32 x 25 po)	86,4 x 96,5 x 68,6 cm (34 x 38 x 27 po)
Capacité du réservoir	20 gal	20 gal	20 gal
Capacité de l'utilisateur	1	2 à 3	3 à 4
Électrique	230 V à 5,1 A	230 V à 9,7 A	230 V à 14,3 A
PCM maximum	8	16	24
Taille du circuit dédié	20 A	20 A	20 A
Fréquence de ligne	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Plage de température (F)	40°-104°	40°-104°	40°-104°
Poids d'expédition	205 livres	255 livres	355 livres



Conformité NFPA 99C niveau 3
Classification UL/CUL

ACCESSOIRES



Ajoutez l'ensemble optionnel de salle de réveil opératoire pour le confinement dans la chambre et le suivi de la procédure des déchets de la cavité buccale.