


Aspirateurs haute performance Midmark^{MD} PowerMax^{MC}

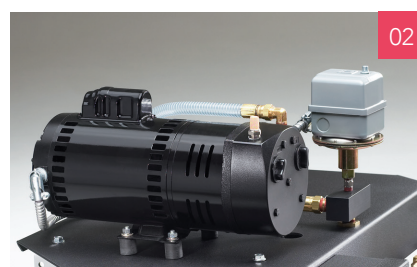

ÉPROUVÉ. FIABLE. EFFICACE.

L'aspirateur dentaire Midmark PowerMax est conçu pour offrir la puissance d'aspiration constante et élevée dont les spécialistes dentaires ont besoin. Contrairement à d'autres systèmes qui doivent fonctionner en permanence pour fournir une aspiration à la demande, PowerMax emmagasine la capacité d'aspiration dans un réservoir d'alimentation et s'active uniquement lorsque les besoins sont supérieurs à l'alimentation stockée, ce qui permet ainsi d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie du système sans compromettre ses performances. Pour plus de commodité et de contrôle, chaque unité comprend un vacuomètre, des pieds antivibrations pour un fonctionnement plus silencieux et une alimentation basse tension 24 V pour un fonctionnement plus sûr et efficace. Combinez PowerMax avec l'ensemble pour salle de réveil opératoire pour le confinement dans la pièce et la gestion des déchets buccaux.

Caractéristiques :

- Puissance d'aspiration jusqu'à 21 po Hg
- Pompe rotative à ailettes sans huile offrant une fiabilité exceptionnelle et un entretien réduit
- Réservoir d'alimentation sous vide certifié ASME
- Garantie sur le produit de 2 ans

- 01 Les aspirateurs PowerMax sont équipés des mêmes commandes électriques accessibles que les autres systèmes d'aspiration et de compresseur Midmark, offrant ainsi un fonctionnement intuitif et uniforme sur tout l'équipement.
- 02 L'aspirateur PowerMax offre une aspiration haute performance pouvant atteindre 21 po Hg, garantissant un traitement efficace, sûr et efficient.
- 03 Chaque aspirateur PowerMax est équipé d'un horomètre qui permet de suivre l'utilisation du système, ce qui simplifie la planification de l'entretien et le suivi de la couverture de la garantie.

SPÉCIFICATIONS DE POWERMAX

Modèle/N° de commande	PM-1	PM-3	PM-4
Capacité de l'utilisateur	1	2 - 3	3 - 4
PCM maximum	8 PCM	16 PCM	24 PCM
Puissance	1 à 3/4 HP	2 à 3/4 HP	3 à 3/4 HP
Volts/Fréquence	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Puissance totale	5,1 A	9,7 A	14,3 A
Disjoncteur	20 A	20 A	20 A
Plage de température	40-104 °F	40-104 °F	40-104 °F
Capacité du réservoir	20 gal	20 gal	20 gal
Taille globale (H x L x P)	31 po x 32 po x 25 po	31 po x 32 po x 25 po	34 po x 38 po x 27 po
Poids pour l'expédition	205 livres	255 livres	355 livres



Conformité NFPA 99C niveau 3
Classification UL/CUL

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Ensemble pour salle de réveil opératoire

Améliorez le flux de travail clinique grâce au confinement en salle et à la surveillance en temps réel des déchets provenant de la cavité buccale.