



VOUS POUVEZ COMPTER SUR LES ASPIRATEURS DENTAIRE À ANNEAU LIQUIDE MIDMARK CLASSICSERIES. ÉPROUVÉ. FIABLE. DE CONFIANCE.

Les aspirateurs à anneau liquide ClassicSeries de Midmark permettent aux cabinets dentaires de fournir des performances fiables avec une conception compacte et peu encombrante. Profitez des meilleures caractéristiques et des technologies éprouvées de nos prédécesseurs de confiance dans une offre intégrée.

Caractéristiques :

- Rendement élevé, performances éprouvées
- Silencieux réducteurs de bruit offerts de série
- Recyclage interne exclusif de l'eau
- Dispositif de contournement recyclant l'eau
- Test d'endurance à 100%
- Construction durable en aluminium-bronze
- Garantie sur le produit inégalée : garantie complète de 5 ans/10 000 heures sur le produit


- 01** Le collecteur d'admission redessiné permet un flux d'air régulier et une plus grande efficacité.
- 02** Des interrupteurs marche/arrêt et des compteurs d'heures séparés pour les modèles à pompe jumelle offrent une grande souplesse d'utilisation.
- 03** Les raccords de tuyau à connexion rapide permettent un entretien sans outil. La soupape de dérivation du recycleur d'eau offre une protection supplémentaire contre les dépôts de minéraux dans l'eau.

Caractéristiques additionnelles :

- Économisez 3 fois la consommation d'eau douce par rapport aux aspirateurs sans recyclage d'eau
- Les arbres des moteurs en acier inoxydable et les moteurs robustes de 1,25 HP/2 HP offrent résistance et fiabilité
- La soupape de dérivation du recycleur d'eau aide à protéger contre les effets néfastes des dépôts de minéraux dans l'eau

Vous pouvez compter sur les aspirateurs dentaires à anneau liquide Midmark ClassicSeries. Éprouvé. Fiable. De confiance.

Coûts d'exploitation au fil du temps*

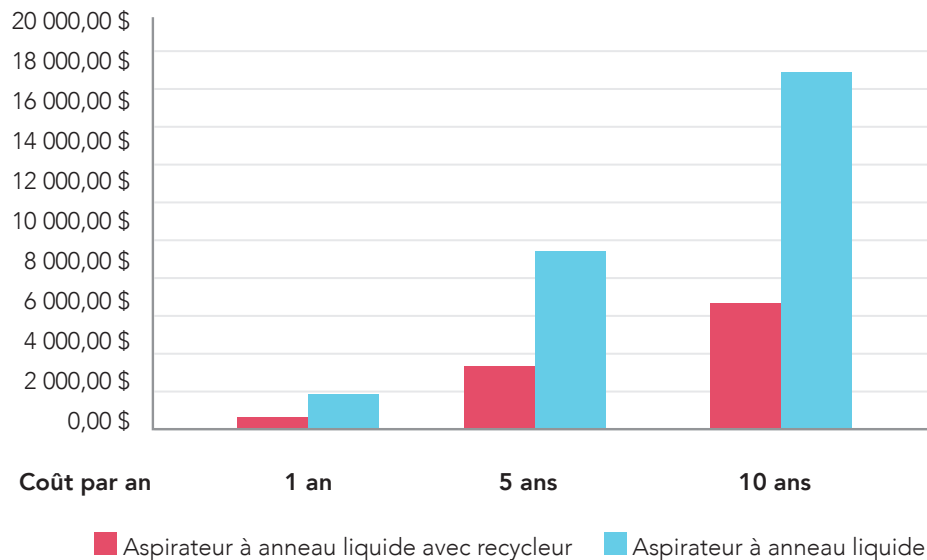

* 2 000 heures/an; 57 600 gallons/an (anneau liquide); 17 280 gallons/an (anneau liquide avec recycleur)

Accessoires



- 01 Le nettoyant pour système d'évacuation Precision Clense Plus**
garde votre aspirateur parfaitement propre, naturellement désinfecté et désodorisé.
- 02 Utilisez notre filtre d'aspiration Dispos-A-Bowl** pour éliminer les déchets d'aspiration de manière sûre et intelligente.
- 03 Séparateur air-eau**

SPÉCIFICATIONS DU CLASSICSERIES

Modèle/N° de commande	CV3 (SIMPLE)	CV3R (SIMPLE)	CV5 (SIMPLE)	CV5R (SIMPLE)	CV6 (POMPE JUMELLE)	CV6R (POMPE JUMELLE)	CV10 (POMPE JUMELLE)	CV10R (POMPE JUMELLE)
Puissance	1,25 HP	1,25 HP	2 HP	2 HP	2,5 HP	2,5 HP	4 HP	4 HP
Taille (H x L x P)	38,1 x 30,48 x 33 cm (15 x 12 x 13 po)	38,1 x 30,48 x 33 cm (15 x 12 x 13 po)	43,2 x 30,48 x 33 cm (17 x 12 x 13 po)	43,2 x 30,48 x 33 cm (17 x 12 x 13 po)	47 x 64,8 x 50,8 cm (18,5 x 25,5 x 20 po)	47 x 64,8 x 50,8 cm (18,5 x 25,5 x 20 po)	47 x 64,8 x 50,8 cm (18,5 x 25,5 x 20 po)	47 x 64,8 x 50,8 cm (18,5 x 25,5 x 20 po)
Capacité de l'utilisateur	3	3	5	5	6	6	10	10
Recyclage de l'eau	No (Non)	Yes (Oui)	No (Non)	Yes (Oui)	No (Non)	Yes (Oui)	No (Non)	Yes (Oui)
Tension - Phase unique	115/230 V	115/230 V	230 V	230 V	115/230 V	115/230 V	230 V	230 V
Intensité du courant	15,0/7,5 A	15,0/7,5 A	13 A	13 A	15,0/7,5 A	15,0/7,5 A	26/13 A	26/13 A
Disjoncteur	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A x 2	20 A x 2	20 A x 2	20 A x 2
Fréquence de ligne	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Poids d'expédition	70 livres	70 livres	76 livres	76 livres	188 livres	188 livres	208 livres	208 livres