




Solutions pour salles mécaniques

DENTAIRES

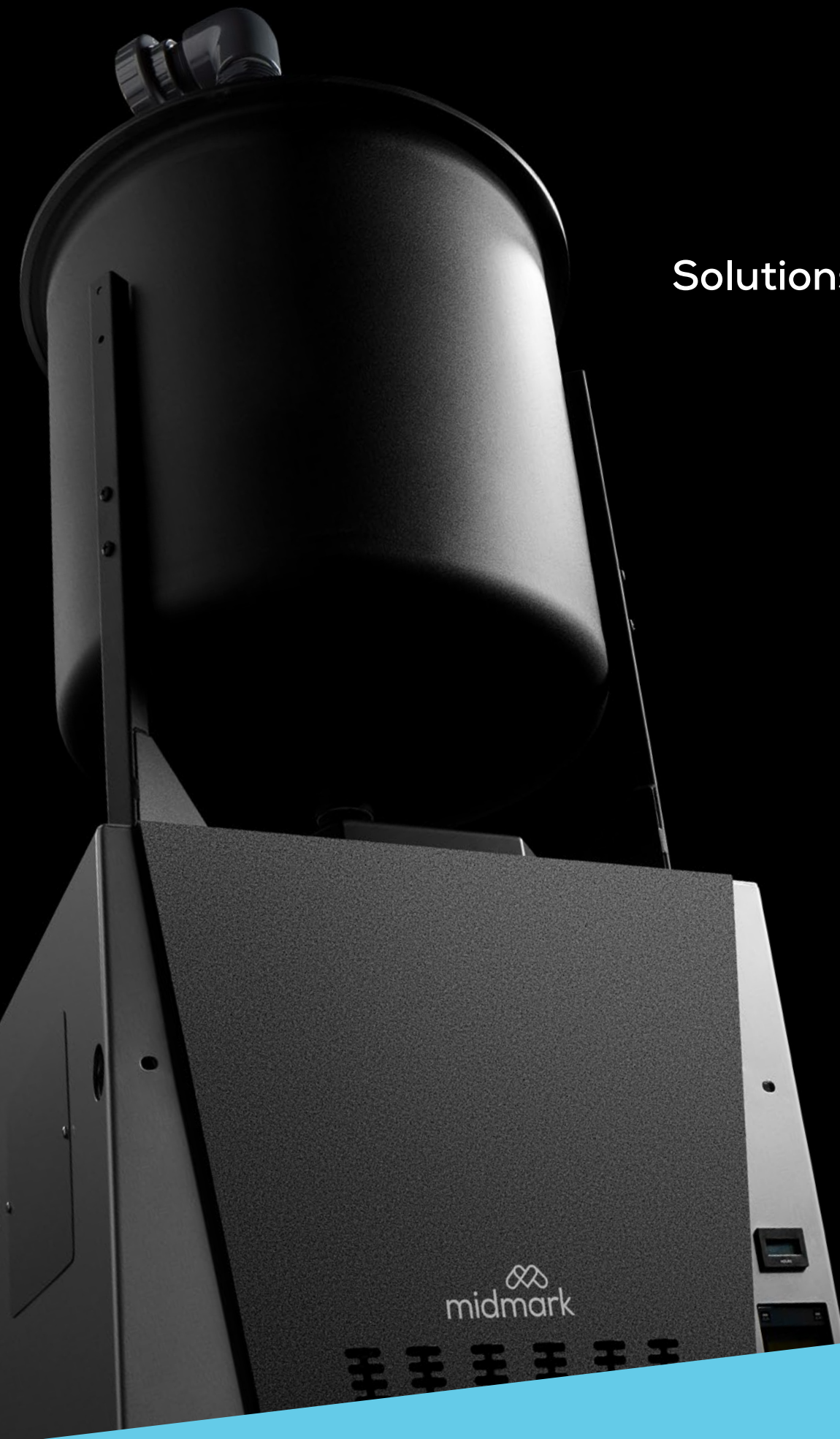

Concevoir de meilleurs soins



**NOUS CROYONS QUE LA CONCEPTION NE
CONCERNE PAS SEULEMENT L'ESPACE,
MAIS AUSSI SA FONCTION.**

Les solutions pour salles mécaniques Midmark^{MD}
sont conçues pour offrir fiabilité et informations
connectées afin de vous aider à maintenir
le bon fonctionnement de votre cabinet et
vous permettre de vous concentrer sur la santé
de vos patients, non sur votre équipement.



Choisir une source d'alimentation fiable

Vos aspirateurs dentaires et vos compresseurs d'air sont le cœur et les poumons de votre cabinet. Ils alimentent vos outils à main et évacuent les particules, la salive et autres substances au point de soins. Assurez la pérennité de votre source d'alimentation grâce à des équipements conçus pour protéger votre productivité et optimiser vos performances.

06
MEILLEURE VISION POUR
DE MEILLEURS SOINS

10
MAINTIEN DES ACTIVITÉS
DU CABINET

14
ÉLÉMENTS À PRENDRE
EN COMPTE

20
ASPIRATEURS INTELLIGENTS
SÉRIE G MIDMARK

26
ASPIRATEURS HAUTE
PERFORMANCE
MIDMARK POWERMAX

08
CALCUL DES COÛTS LIÉS
AUX TEMPS D'ARRÊT

12
OPTIMISATION DES
PERFORMANCES

16
PRODUITS ET SOLUTIONS
MIDMARK

22
ASPIRATEURS À SEC
MIDMARK POWERVAC

28
ACCESSOIRES ET PIÈCES
DE RECHANGE

18
COMPRESSEURS D'AIR
INTELLIGENTS MIDMARK

24
ASPIRATEURS À ANNEAU
LIQUIDE MIDMARK
CLASSICSERIES

30
CONCEPTION AVEC
MIDMARK



BALAYEZ OU CLIQUEZ POUR AFFICHER LES
SOLUTIONS POUR SALLES MÉCANIQUES

Une meilleure vision pour de meilleurs soins

Comprenez la façon dont votre équipement fonctionne afin de pouvoir vous concentrer sur les personnes qui comptent le plus.

Midmark Smart View^{MC} est un service infonuagique* conçu pour maximiser la valeur des produits Midmark en fournissant :

- des données sur la performance en temps réel;
- un suivi proactif de l’entretien;
- un suivi et des rapports de conformité;
- des mises à jour logicielles;

par l’entremise du portail en ligne myMidmark.

Grâce à des améliorations continues et à des mises à niveau de ses fonctionnalités, Smart View peut contribuer à éliminer les risques liés aux technologies obsolètes, tout en améliorant les performances pour favoriser l’efficacité et la conformité à long terme.

** Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un abonnement Smart View actif.*

Chez Midmark, nous harmonisons l’espace clinique, le flux de travail et la technologie pour offrir de meilleures expériences de soins.

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU MIDMARK DENTAL

Grâce à une nouvelle technologie connectée et à des solutions améliorées pour les salles opératoires, le traitement des instruments et la salle mécanique, le nouveau Midmark Dental contribue à établir une nouvelle norme et à repousser les limites du possible en matière de soins dentaires. **Découvrez comment nous pouvons concevoir ensemble de meilleurs soins.**



BALAYEZ OU CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR COMMENT VOUS CONNECTER



VOIR L'ENSEMBLE DE L'ŒUVRE

Accédez aux tendances d'utilisation, aux données de conformité et à l'état des équipements de vos solutions Midmark connectées à partir d'un tableau de bord sécurisé, que vous gériez un seul établissement ou plusieurs.



AMÉLIORER LES PERFORMANCES

Connectez vos fauteuils dentaires, vos porte-instruments et vos lampes à DEL pour bénéficier de mises à jour logicielles continues visant à améliorer la performance de l'équipement et le flux de travail.



RATIONALISEZ LA GESTION DE VOTRE ÉQUIPEMENT

Gérez les stérilisateurs connectés dans toute votre organisation pour améliorer l'efficacité du flux de travail, simplifier la conformité et prolonger la durée de vie de votre équipement.



ASSUREZ LA CONTINUITÉ DES SOINS

Recevez des notifications d'entretien de routine et des alertes critiques pour vos compresseurs d'air et vos aspirateurs à sec connectés afin de minimiser les temps d'arrêt et d'assurer la continuité des soins.

Calculer les coûts liés aux temps d'arrêt

La salle mécanique est souvent dissimulée et tend à tomber dans l'oubli. Elle est pourtant le moteur de l'ensemble de votre cabinet dentaire. Si votre compresseur d'air ou votre aspirateur tombe en panne, tout votre cabinet est paralysé.

Quel serait le coût d'un tel temps d'arrêt pour votre cabinet?



LE COÛT QUOTIDIEN D'UNE PANNE

Une journée d'inactivité coûte non seulement les revenus de cette journée, mais aussi les frais généraux que vous continuez à payer même si vous ne recevez pas de patients.

**~4 000 \$ à 7 000 \$
et plus**

DE REVENUS PERDUS PAR JOUR

Les cabinets dentaires généraux génèrent en moyenne entre 4 000 et 7 000 dollars, voire plus, de revenus quotidiens¹.

**~2 000 \$ à 4 000 \$
et plus**


EN FRAIS GÉNÉRAUX PAR JOUR

Même lorsque la production s'arrête, environ 85 % des frais généraux persistent, notamment les salaires, le loyer, les services publics et les baux^{2,3}.

~6 000 \$ à 11 000 \$ et plus

EN PERTES QUOTIDIENNES TOTALES

Entre les pertes de production et les frais généraux, une seule journée d'arrêt peut coûter plus de 10 000 \$ à votre cabinet.

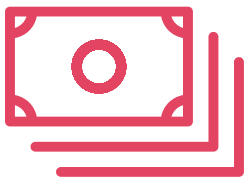

COÛTS DE REPRISE DU SERVICE SUPPLÉMENTAIRES


Même après la remise en service de l'équipement, les coûts continuent de s'amonceler. La reprise du service peut nécessiter des frais de réparation, de la location d'appareils, des pièces de rechange et une réorganisation de l'horaire, sans parler de l'incidence à long terme du temps perdu et des patients perdus.

INSATISFACTION DES PATIENTS


Les rendez-vous retardés ou annulés peuvent frustrer et gêner les patients, qui peuvent alors choisir de prendre rendez-vous auprès d'un autre professionnel dentaire.

RÉPUTATION ENDOMMAGÉE ET PERTE DE REVENUS FUTURS

Les patients frustrés peuvent choisir d'exprimer leur frustration en ligne, en laissant des commentaires négatifs ou de mauvaises notes, ce qui dissuade les nouveaux patients et nuit au potentiel de croissance future.

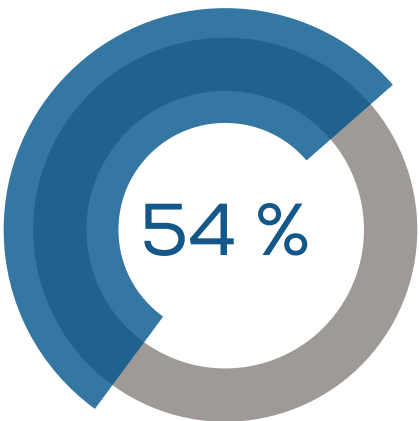

des patients déclarent qu'ils changeraient de professionnel après une seule mauvaise expérience⁴.

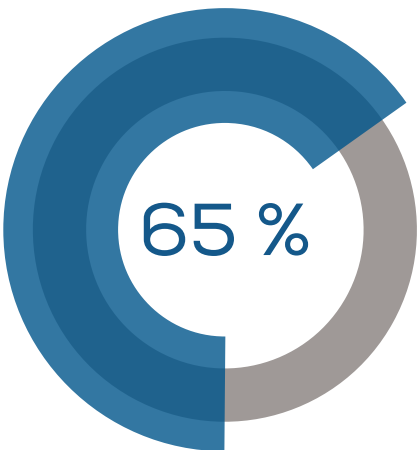

des nouveaux patients sont plus enclins à faire confiance aux dentistes qui ont de bonnes notes et des avis positifs en ligne⁴.

PROTÉGEZ VOTRE CABINET

Une seule journée d'indisponibilité coûte bien plus cher que le coût initial de l'intervention. Elle peut vous coûter des revenus, du temps, la fidélité de vos patients et bien plus encore. Protégez votre cabinet et votre réputation grâce à des solutions pour salles mécaniques conçues pour rester opérationnelles, efficaces et fiables.

Maintien des activités du cabinet

CONÇU POUR PROTÉGER LA PRODUCTIVITÉ



ANTICIPER LES PROBLÈMES POTENTIELS

Chaque cabinet dépend de l'air comprimé et de la succion pour alimenter les outils qui permettent de prodiguer des soins. Lorsque vous pouvez observer le fonctionnement de votre compresseur d'air et de votre aspirateur, vous pouvez détecter les problèmes avant qu'ils n'interrompent les soins. La connectivité permet à votre équipe d'avoir un aperçu en temps réel de l'état des équipements, ce qui vous permet d'agir rapidement, de rester proactif et de réduire les temps d'arrêt évitables.

Midmark Smart View^{MC} assure cette connectivité et cette visibilité, en envoyant des rappels d'entretien, des notifications de performance et des alertes lorsqu'un composant de votre compresseur d'air ou de votre aspirateur connecté nécessite une attention particulière, qu'il s'agisse d'une salle mécanique trop chaude ou d'un filtre approchant ses limites. Ce type de visibilité vous donne le temps d'agir avant que les performances ne baissent, vous aidant ainsi à rester en avance sur les horaires des patients, et non en retard.

« Grâce à Midmark Smart View, je peux voir ce qui se passe avec mon équipement et être immédiatement averti si quelque chose ne va pas. Cette visibilité me permet de reprendre mes activités plus rapidement afin que je puisse me concentrer sur mes patients, et non sur l'équipement. »

— Dr Mark Oleson, Dublin Endodontics

BÉNÉFICIEZ D'UNE SUCCION PUISSANTE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

La connectivité est l'un des éléments qui déterminent les performances, l'autre étant la constance. Les aspirateurs dentaires ne satisfont pas tous de la même manière aux exigences cliniques réelles. De nombreux aspirateurs à sec utilisent des pompes à soufflerie qui s'affaiblissent lorsque la pression augmente ou que plusieurs salles d'opération sont utilisées, ce qui entraîne des performances irrégulières, des ralentissements et des retards dans l'horaire.

Les aspirateurs à sec Midmark utilisent une technologie à griffes rotatives de déplacement positif pour fournir une succion puissante et constante, même lorsque la résistance augmente. Cette fiabilité vous garantit :

- une succion constante pendant les procédures exigeantes;
- une succion fiable dans toutes les salles d'opération;
- moins de variations qui ralentissent les soins;
- un soutien plus important pour une succion rapide.

La régularité du déplacement positif permet d'assurer la continuité des procédures, de prévenir les infections et de garantir une expérience prévisible pour le patient.

COMBINEZ-LES POUR DES PERFORMANCES FIABLES

La connectivité vous permet d'anticiper les problèmes et d'agir rapidement, tandis que la succion constante vous donne les moyens de travailler efficacement. Ensemble, elles contribuent à protéger votre productivité et à réduire le risque d'interruptions imprévues.


Mais même les performances les plus constantes dépendent de l'environnement qui entoure votre équipement. C'est pourquoi l'étape suivante consiste à concevoir une salle mécanique qui lui permette de fonctionner de manière optimale.

Optimisation de la performance



CONÇU POUR UNE FIABILITÉ AU QUOTIDIEN

Une alimentation en air et une succion constantes dépendent d'un équipement en bon état. Et un équipement en bon état dépend de son environnement. Une bonne conception permet de minimiser les contraintes exercées sur votre équipement, assure une performance constante et aide à prévenir les problèmes pouvant entraîner des temps d'arrêt. Protégez votre productivité en créant les conditions optimales dans votre salle mécanique pour que votre compresseur d'air et votre équipement de succion fonctionnent à leur plein potentiel.

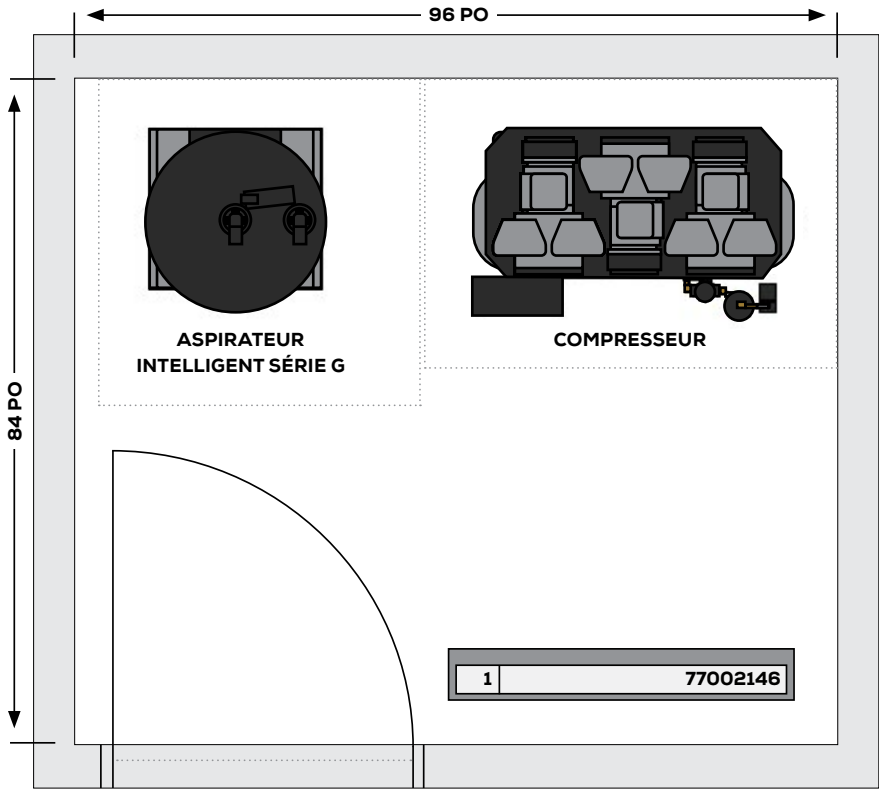

Les experts en conception de Midmark sont prêts à vous aider à créer votre salle mécanique optimale. Du dimensionnement approprié des équipements à la disposition de la plomberie, nous nous occupons de tout.

Appelez au **1 800-MIDMARK** pour commencer.

DONNEZ DE L'AIR À VOTRE ÉQUIPEMENT

Les pratiques d'excellence recommandent que la salle mécanique soit suffisamment grande pour pouvoir prévoir espacer vos équipements d'au moins 12 pouces les uns des autres et à 12 pouces de chaque mur*. Sans cet espace, les techniciens pourraient avoir des difficultés à installer et à entretenir votre équipement, et votre équipe pourrait avoir du mal à effectuer l'entretien de routine.

Un espace restreint peut également réduire la circulation de l'air et la ventilation, ce qui impose une contrainte inutile aux moteurs et aux composants internes. Un espace suffisant favorise le bon fonctionnement des équipements, contribuant ainsi à préserver leur performance et à éviter les temps d'arrêt.

Bien qu'il ne s'agisse pas de la pièce la plus prestigieuse de votre cabinet, la salle mécanique joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de vos salles d'opération. Veillez donc à lui réserver l'espace nécessaire à votre équipement.

** Reportez-vous toujours aux exigences spécifiques de votre équipement en matière d'espace de dégagement.*

CONTRÔLEZ LA TEMPÉRATURE ET L'HUMIDITÉ

Les compresseurs d'air et les systèmes de succion dégagent naturellement de la chaleur pendant leur fonctionnement, et les pièces confinées peuvent rapidement devenir trop chaudes sans une ventilation adéquate. Lorsque les températures dépassent régulièrement les spécifications de l'équipement, cela peut entraîner une défaillance prématurée des composants.

L'humidité ajoute une difficulté supplémentaire. Une humidité excessive peut s'accumuler dans les conduites d'air et exercer une contrainte supplémentaire sur les moteurs et les pompes. Une chaleur et une humidité excessives peuvent réduire l'efficacité, provoquer une usure prématurée et raccourcir la durée de vie de votre équipement.

Pour obtenir des performances optimales, la solution est simple : mettez en place un flux d'air constant, maintenez la température et l'humidité dans les plages recommandées pour votre équipement et envisagez un refroidissement supplémentaire si l'espace est clos ou fortement chargé. Un environnement contrôlé favorise des performances optimales et contribue à éviter les temps d'arrêt coûteux, protégeant ainsi la fiabilité de l'ensemble de votre cabinet.

PLANIFIEZ L'ÉLECTRICITÉ ET LA PLOMBERIE

Une alimentation électrique stable et dédiée, ainsi qu'une tension correcte, contribuent à protéger les performances des équipements et à réduire le risque de déclenchement des disjoncteurs. Planifiez les circuits en fonction des spécifications des équipements et de la facilité d'accès pour l'entretien.

Vous pouvez également positionner votre plomberie et vos conduites principales de manière à faciliter les interventions futures. Les meilleures conceptions veillent à ce que les conduites soient directes, de taille appropriée et accessibles.

Assurez le succès de vos équipements grâce à une salle technique conçue pour soutenir les performances, protéger la fiabilité et permettre à votre cabinet de continuer à fonctionner.



Éléments à prendre en compte

 DIMENSIONS ET DISPOSITION DES SALLES	 AVANTAGES CONNECTÉS	 DURÉE DE VIE DES OUTILS À MAIN
La disposition de votre salle mécanique favorise-t-elle la ventilation et simplifie-t-elle l'entretien? Un espace adapté permet non seulement aux techniciens d'accéder à votre équipement pour l'installation, l'entretien et les réparations, mais contribue également à améliorer la circulation de l'air pour une meilleure ventilation et une durée de vie prolongée. Envisagez de faire appel à un concepteur de cabinets dentaires expérimenté pour optimiser votre espace. Les experts en conception de Midmark peuvent vous aider à vous assurer que votre salle mécanique est conçue pour offrir un environnement propice au bon fonctionnement de votre cabinet.	Et si votre équipement pouvait vous avertir lorsqu'il a besoin d'entretien ou ne fonctionne pas correctement? Les compresseurs d'air et les aspirateurs sont le cœur et les poumons qui permettent aux cabinets de fonctionner. Lorsqu'ils tombent en panne en raison d'un manque d'entretien régulier ou d'erreurs critiques, l'ensemble du cabinet peut se retrouver à l'arrêt. Privilégiez les équipements conçus pour être connectés dans votre salle mécanique afin d'améliorer leur fiabilité et leurs performances. La connectivité Midmark Smart View^{MC} vous permet de recevoir des notifications d'entretien régulier et des alertes critiques pour vous aider à anticiper les problèmes potentiels, à minimiser les temps d'arrêt et à assurer la continuité des soins.	Remplacez-vous vos outils à main plus souvent que leur durée de vie indiquée? Les compresseurs d'air anciens et grand public peuvent ne pas nettoyer et sécher correctement l'air comprimé. L'air saturé d'huile et d'humidité peut endommager vos outils à main. Envisagez l'achat d'un nouveau compresseur d'air de qualité clinique conçu pour la dentisterie. Les compresseurs d'air intelligents Midmark sont conçus pour répondre aux normes NFPA 99 niveau 3 de la National Fire Protection Association pour les établissements de santé. Ils filtrent 99,9997 % des contaminants et séchent l'air jusqu'à un point de rosée sous pression de -25 °F.
 ÉCONOMIES D'EAU	 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	 ÉVOLUTIVITÉ
Votre aspirateur vous aide-t-il à économiser l'eau et à réduire votre facture d'eau? Un seul aspirateur à anneau humide peut consommer environ 60 000 gallons d'eau par an. Certains aspirateurs à double plateforme peuvent consommer jusqu'à 240 000 gallons par an. Avec une telle quantité d'eau, on pourrait remplir une piscine moyenne 12 fois par an. Envisagez d'utiliser un aspirateur à sec pour réduire votre consommation d'eau et diminuer vos factures. La technologie de déplacement positif des aspirateurs à sec Midmark PowerVac et des aspirateurs intelligents série G Midmark offre une succion puissante et constante sans utiliser d'eau, ce qui vous aide à réduire le gaspillage et à limiter les coûts.	Votre aspirateur fait-il grimper vos factures d'électricité? De nombreux aspirateurs fonctionnent à pleine puissance, quelle que soit la demande, générant ainsi un excès de chaleur et consommant plus d'énergie que les systèmes qui adaptent automatiquement leurs performances en fonction des besoins. Envisagez d'utiliser un aspirateur doté d'une gestion de l'énergie basée sur la demande. L'aspirateur intelligent série G Midmark utilise un variateur de fréquence (VFD) qui ajuste automatiquement la vitesse du moteur en fonction de la demande de succion. La réduction de la puissance pendant les périodes de faible demande permet de minimiser la consommation d'énergie, tandis que l'augmentation de la puissance en cas de besoin permet de maintenir une succion constante.	Votre aspirateur peut-il s'adapter à la croissance de votre cabinet? L'augmentation du nombre d'utilisateurs accroît la sollicitation de votre aspirateur et peut limiter la puissance de succion disponible. Avec la plupart des aspirateurs dentaires, il est nécessaire d'acheter un nouveau modèle pour répondre à cette demande accrue. Optez pour un aspirateur suffisamment polyvalent pour évoluer avec votre cabinet. Les aspirateurs Midmark PowerVac et les aspirateurs intelligents série G peuvent répondre aux besoins croissants de votre cabinet grâce à une simple trousse de mise à niveau.

Produits et solutions Midmark^{MD}



BALAYEZ OU CLIQUEZ POUR VOIR LES PRODUITS

Compresseurs d'air intelligents Midmark^{MD}

Compatibles avec Smart View^{MC}

CONÇUS POUR DES SOINS SÛRS ET EN TOUTE CONFIANCE

Contribuez à protéger vos patients, à optimiser les performances des outils à main et à préserver votre équipement grâce aux compresseurs d'air intelligents Midmark. Dotés d'un filtre coalescent qui élimine 99,9997 % des contaminants de l'air comprimé et d'un système de séchage qui abaisse le point de rosée sous pression en dessous de 0 °F (-25 °F), ces compresseurs sont spécialement conçus pour fournir l'air propre et sec dont votre cabinet a besoin.



01

01 CONCEPTION SANS HUILE

Simplifiez l'entretien grâce à une conception sans huile qui élimine les vidanges d'huile fastidieuses et contribue à préserver les ressources.

02 COUVERCLE INSONORISANT

Créez un environnement plus calme et plus agréable grâce à un couvercle insonorisant en option qui réduit le bruit de 5 décibels.

03 FILTRATION DE L'AIR ET SÉCHAGE

Protégez vos outils à main de l'huile, de l'humidité et de l'usure prématurée grâce à un filtre coalescent de 0,01 micron et à un système de séchage par dessiccation qui fournissent un air propre et sec.

04 TAUX DE COMPRESSION ÉLEVÉ

Profitez de l'un des taux de compression en pieds cubes par minute (PCM) les plus élevés du marché pour un débit d'air constant et fiable.

- **CONNECTIVITÉ SMART VIEW^{MC}**
Connectez-vous à Smart View^{MC} pour bénéficier d'une meilleure visibilité sur l'état et le fonctionnement du compresseur, notamment grâce à des notifications d'entretien régulier et des alertes critiques qui permettent d'éviter les temps d'arrêt et d'assurer la continuité des soins.

• OPTIONS DE CAPACITÉ UTILISATEUR

Optimisez votre flux de travail grâce à des modèles disponibles en fonction de la capacité utilisateur, notamment 1 à 3 utilisateurs, 3 à 5 utilisateurs, 5 à 7 utilisateurs ou 7 à 10 utilisateurs.

• CONFORMITÉ AUX NORMES NFPA

Équipez votre cabinet de compresseurs d'air conformes à la norme NFPA 99 niveau 3, spécialement conçus pour la dentisterie.

• COUVERTURE DE LA GARANTIE


Protégez votre équipement grâce à une garantie limitée complète de 5 ans/10 000 heures.



02



03

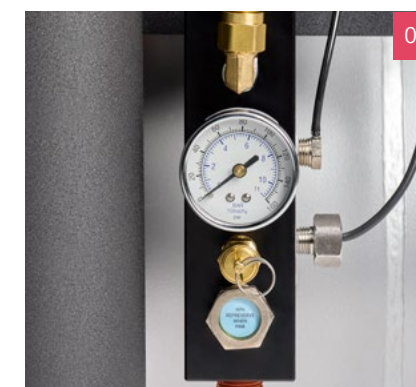


04

Aspirateurs intelligents série G Midmark^{MD}

Compatibles avec Smart View^{MC}

CONÇUS POUR L'EFFICACITÉ, LA FIABILITÉ ET LA ROBUSTESSE

L'aspirateur intelligent série G Midmark^{MD} tire parti de la fiabilité de la technologie des pompes volumétriques pour fournir une succion puissante et constante dans vos salles d'opération. La conception sans huile et sans eau de cet aspirateur simplifie l'entretien et, associée à une gestion de l'énergie basée sur la demande, contribue à réduire vos factures d'électricité et à préserver les ressources pour une planète plus verte.

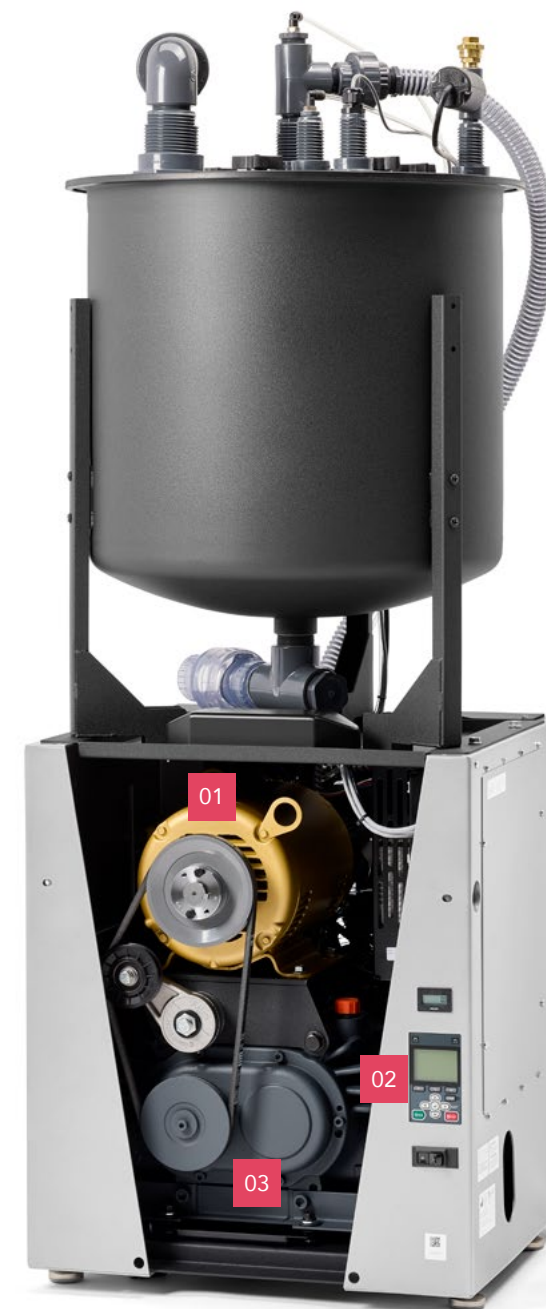

01 MOTEUR DE 3 CHEVAUX-VAPEUR
Bénéficiez d'un moteur haute performance de 3 chevaux-vapeur qui contribue à maintenir une succion puissante et constante dans toutes les salles d'opération.

02 VARIATEUR DE FRÉQUENCE
Obtenez exactement la puissance dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, grâce à un variateur de fréquence (VFD) qui ajuste automatiquement la vitesse du moteur en fonction de la demande de succion.



03 TECHNOLOGIE À DÉPLACEMENT POSITIF
Optimisez les performances grâce à la technologie de déplacement positif qui offre une succion plus puissante et plus constante que les aspirateurs à soufflerie et une puissance de succion pouvant atteindre 18 pouces Hg, soit environ deux fois la force des autres aspirateurs à sec.

- **CONCEPTION SANS HUILE NI EAU**
Simplifiez l'entretien et préservez les ressources grâce à une conception sans huile ni eau qui élimine le gaspillage d'eau et les vidanges d'huile fastidieuses.
- **CONNECTIVITÉ SMART VIEW^{MC}**
Connectez-vous à Smart View^{MC} pour bénéficier d'une meilleure visibilité sur l'état et les performances de l'aspirateur, notamment grâce à des notifications d'entretien régulier et des alertes critiques qui permettent d'éviter les temps d'arrêt et d'assurer la continuité des soins.
- **OPTIONS DE CAPACITÉ UTILISATEUR**
Optimisez votre flux de travail grâce aux modèles d'aspirateurs intelligents série G adaptés à la capacité utilisateur, notamment 3 à 5 utilisateurs, 5 à 7 utilisateurs, 6 à 10 utilisateurs ou 7 à 10 utilisateurs (double ou simple), 10 à 14 utilisateurs ou 14 à 20 utilisateurs.
- **TROUSSE DE MISE À NIVEAU DE LA CAPACITÉ**
Augmentez la capacité du nombre d'utilisateurs à mesure que votre cabinet se développe grâce à une simple trousse de mise à niveau, sans avoir à remplacer l'ensemble du système.
- **CONFORMITÉ AUX NORMES NFPA**
Équipez votre cabinet d'aspirateurs conformes à la norme NFPA 99 niveau 3, spécialement conçus pour la dentisterie.
- **COUVERTURE DE LA GARANTIE**
Protégez votre investissement grâce à une garantie limitée complète de 5 ans/10 000 heures et à une garantie limitée de 10 ans/20 000 heures sur la pompe.

Aspirateur à sec Midmark^{MD} PowerVac^{MD}

CONÇU POUR UNE SUCCION PUISSANTE

Conçu pour offrir une puissance et des performances exceptionnelles, l'aspirateur sec Midmark^{MD} PowerVac fonctionne sans huile ni eau, ce qui vous permet de réduire vos factures d'eau et de préserver les ressources pour une planète plus verte.

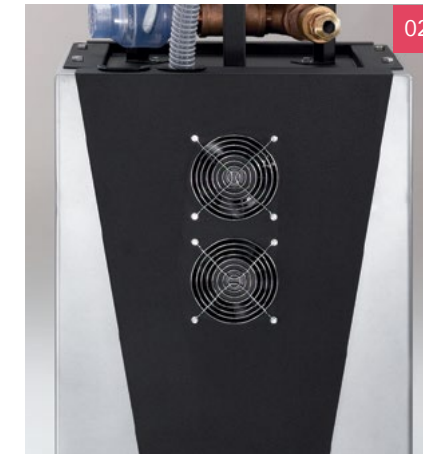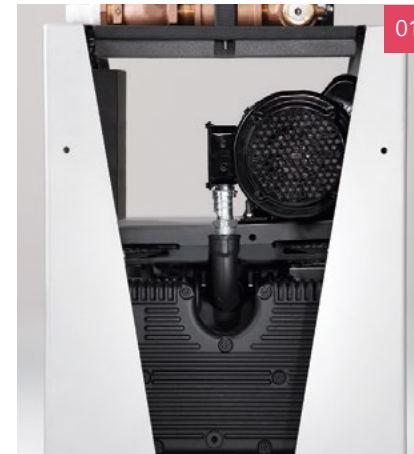

01 CONCEPTION SANS HUILE NI EAU
Simplifiez l'entretien et préservez les ressources grâce à une conception sans huile ni eau qui élimine le gaspillage d'eau et les vidanges d'huile fastidieuses.

02 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT DOUBLE
Le ventilateur de refroidissement double intégré de 200 pi³/min contribue à réduire l'usure du moteur et des autres composants internes.

03 ROULETTES ROBUSTES
Simplifiez l'installation et l'accès pour l'entretien grâce à des roulettes robustes exclusives qui facilitent le positionnement et le déplacement de l'aspirateur PowerVac.

04 RACCORDS DE TUYAUX PRÊTS À L'EMPLOI
Facilitez et accélérez l'installation grâce à des raccords de tuyaux prêts à l'emploi qui ne nécessitent aucun outil.

- **TECHNOLOGIE DE DÉPLACEMENT POSITIF**
Optimisez les performances grâce à la technologie de déplacement positif qui offre une succion plus puissante et plus constante que les aspirateurs à soufflerie et une puissance de succion pouvant atteindre 18 pouces Hg, soit environ deux fois la force des autres aspirateurs à sec.
- **PIEDS DE MISE À NIVEAU RÉGLABLES**
Maintenez votre aspirateur à niveau, même sur des surfaces irrégulières, grâce à ses pieds réglables.

- **OPTIONS DE CAPACITÉ UTILISATEUR**
Optimisez votre flux de travail grâce aux modèles PowerVac adaptés à la capacité utilisateur, notamment 3 à 5 utilisateurs, 5 à 7 utilisateurs, 6 à 10 utilisateurs ou 7 à 10 utilisateurs (double ou simple), 10 à 14 utilisateurs ou 14 à 20 utilisateurs.
- **TROUSSE DE MISE À NIVEAU DE LA CAPACITÉ**
Augmentez la capacité du nombre d'utilisateurs à mesure que votre cabinet se développe grâce à une simple trousse de mise à niveau, sans avoir à remplacer l'ensemble du système.

- **CONFORMITÉ AUX NORMES NFPA**
Équipez votre cabinet d'aspirateurs conformes à la norme NFPA 99 niveau 3, spécialement conçus pour la dentisterie.
- **COUVERTURE DE LA GARANTIE**
Protégez votre équipement grâce à une garantie limitée complète de 5 ans/10 000 heures et à une garantie limitée de 10 ans/20 000 heures sur la pompe.

Aspirateurs à anneau humide Midmark^{MD} Classic Series^{MD}

CONÇUS POUR OPTIMISER L'ESPACE

Les aspirateurs à anneau humide Classic Series offrent des performances fiables dans un format compact qui permet d'optimiser l'espace sans sacrifier la puissance. Choisissez un modèle avec système de recyclage interne de l'eau pour réduire la consommation d'eau douce et diminuer les coûts des services publics.



01 COLLECTEUR D'ADMISSION
Maintenez un débit d'air régulier et des performances constantes grâce à un collecteur d'admission conçu pour un fonctionnement efficace.

02 COMMANDES À DOUBLE POMPE
Contrôlez le fonctionnement des aspirateurs à double modèle grâce à des interrupteurs marche/arrêt individuels et des compteurs horaires pour chaque pompe.

03 RECYCLAGE DE L'EAU
Choisissez un modèle avec système de recyclage interne de l'eau pour réduire la consommation d'eau douce et les coûts liés aux services publics d'eau.



04 DÉRIVATION DU RECYCLAGE
Utilisez la vanne de dérivation du recyclage pour basculer entre le mode recyclage et le mode eau douce en cas de besoin, par exemple pour réduire l'accumulation de chaleur ou de minéraux et contribuer à préserver les performances de la pompe.

• **BOÎTIER EN BRONZE D'ALUMINIUM**
Faites confiance à la construction durable en bronze d'aluminium pour résister aux exigences quotidiennes de l'aspiration de liquides et prolonger la durée de vie de l'équipement.



• **OPTIONS DE CAPACITÉ UTILISATEUR**
Optimisez votre flux de travail grâce aux modèles adaptés à la capacité utilisateur, notamment 3 utilisateurs, 5 à 7 utilisateurs, 7 à 10 utilisateurs, 6 à 10 utilisateurs, 10 à 14 utilisateurs ou 14 à 20 utilisateurs.

• **CONFORMITÉ AUX NORMES NFPA**
Équipez votre cabinet d'aspirateurs conformes à la norme NFPA 99 niveau 3, spécialement conçus pour la dentisterie.

• **COUVERTURE DE LA GARANTIE**
Protégez votre équipement grâce à une garantie limitée complète de 5 ans/10 000 heures.

Aspirateurs haute performance

Midmark^{MD} PowerMax^{MC}

CONÇUS POUR LES PROCÉDURES LES PLUS EXIGEANTES

Conçus pour les spécialistes qui ont besoin d'une succion maximale, les aspirateurs Midmark PowerMax offrent une puissance exceptionnelle au moment où vous en avez besoin. En s'activant uniquement en cas de besoin, le système permet d'économiser l'énergie, de réduire l'usure et d'assurer une fiabilité à long terme.



01 COMPTEUR HORAIRE FACILE À LIRE

Surveillez l'utilisation du système et effectuez l'entretien en temps opportun grâce à un compteur horaire clair et facile à lire.

02 PIEDS ANTIVIBRATIONS

Contribuez à réduire le bruit et à améliorer le confort grâce à des pieds antivibrations.

03 MODULE DE SALLE DE RÉVEIL

Renforcez les protocoles de sécurité grâce à un module optionnel pour salle de réveil permettant le confinement des déchets en salle d'opération et la surveillance visuelle pendant les interventions.

04 POMPE À PALETTES SANS HUILE

Optez pour une pompe à palettes sans huile pour bénéficier de performances constantes sans avoir à effectuer de vidanges fastidieuses.

• PUISSANCE DE SUCCION

Bénéficiez d'une succion puissante et fiable pouvant atteindre 21 pouces Hg pour les procédures spécialisées exigeantes.

• CONFORMITÉ AUX NORMES NFPA

Équipez votre cabinet d'aspirateurs conformes à la norme NFPA 99 niveau 3, spécialement conçus pour la dentisterie.

• COUVERTURE DE LA GARANTIE

Protégez votre équipement grâce à une garantie produit limitée de 2 ans.



Accessoires et pièces de rechange

CONÇUS POUR PRÉSERVER ET AMÉLIORER

Pour plus d'informations sur les pièces et accessoires Midmark, veuillez contacter le service d'expérience client de Midmark au **1 800 MIDMARK**.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR COMPRESSEURS D'AIR



Couvercles insonorisants PowerAir^{MD}
Réduisent le bruit du compresseur de 5 dBA



Trousse de compresseur tandem PowerAir
Permet le fonctionnement simultané de deux compresseurs d'air dentaires Midmark connectés à une conduite d'alimentation en air commune dans la salle de soins.

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS ET COMPRESSEURS D'AIR



Support empilable
Permet d'empiler certains modèles de compresseurs et d'aspirateurs pour gagner de la place.



Poignées de levage
Vous aident à déplacer l'équipement grâce à cet ensemble de 4 poignées en acier épais avec des coussinets en mousse confortables et des goupilles de verrouillage fixées.



Relais de commande basse tension Fournit un interrupteur mécanique pour allumer et éteindre l'appareil depuis votre panneau de commande.



Transformateurs abaisseurs et éleveurs de tension
Réduisent ou augmentent la tension d'entrée de 10 % lorsque la tension d'alimentation est trop élevée ou trop faible par rapport aux spécifications de l'équipement.

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS



Trousse de conversion pour l'aspirateur intelligent série G
Transforme deux aspirateurs intelligents série G simples en un aspirateur double.



Trousse de conversion PowerVac
Transforme deux aspirateurs PowerVac simples en un aspirateur double.



Unité Solmetex^{MD}
Offre un taux de séparation certifié (ISO 11143:2008) de 99 %



Trousses de montage des aspirateurs intelligents série G et PowerVac
Installez un séparateur d'amalgames Solmetex^{MD} sur l'aspirateur intelligent série G ou PowerVac.



Systèmes de filtration/dérivation d'eau
Assurent une coupure sécurisée de l'alimentation en eau depuis le cabinet dentaire.



Panneaux de commande
Fournissent des commutateurs à distance personnalisables pour contrôler vos conduites d'air, d'aspiration et d'eau.



Dispos-A-Bowl
Offre un moyen sûr et intelligent d'éliminer les filtres d'aspirateurs usagés et les déchets



Precision Clense Plus
Nettoie et désodorise l'ensemble du système d'évacuation.



Trousse de réduction de dépôts minéraux
Réduit l'accumulation de dépôts minéraux dans les aspirateurs à anneau humide situés dans des régions où l'eau souterraine est minéralisée ou « dure ».



Accessoires pour salle de réveil
Comprend un paquet de 5 cartouches jetables, un régulateur de débit libre DISS, une station de sortie DISS et 6 pieds de tuyau conducteur.



Trousse de raccordement aux eaux usées
Permet de raccorder les eaux usées de deux aspirateurs CV3 ou CV5 pour fonctionner en tant que système double (équivalent CV6 ou CV10); nécessite une trousse de raccordement double.



Trousses de vannes d'admission/d'échappement d'eau pour aspirateurs multiples
Raccordez l'admission et l'échappement d'eau pour deux aspirateurs CV3 ou CV5 afin de les faire fonctionner comme un système double (équivalent CV6 ou CV10); nécessite une trousse de raccordement double.



Trousse d'échappement PowerMax
Ventile le système d'aspiration PowerMax vers l'extérieur.



Séparateurs air/eau
Se fixent au mur et séparent l'air d'échappement de l'eau d'échappement.

Conception avec Midmark^{MD}

CONÇU POUR VOUS

Notre équipe d’experts en conception est prête à vous aider à personnaliser et à équiper l’ensemble de votre environnement clinique, de l’agencement de chaque pièce à chaque stérilisateur, fauteuil, porte et tiroir, jusqu’aux plus petits détails. Laissez-nous vous aider à concevoir le meilleur environnement pour votre cabinet.



CONNECTEZ-VOUS VIRTUELLEMENT POUR UNE CONCEPTION EN DIRECT

Faites appel aux services de conception en direct de Midmark pour donner vie à votre vision. Nous vous aidons à visualiser votre espace, à comprendre son fonctionnement et à repérer les difficultés potentielles afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées et offrir de meilleurs soins.



BALAYEZ OU CLIQUEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS.



JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR UNE EXPÉRIENCE MIDMARK

Découvrez les équipements, les finitions et les options d’aménagement lors d’une visite immersive Midmark Experience. Grâce aux conseils d’experts et à une vision claire des options qui s’offrent à vous, vous serez en mesure de prendre en toute confiance des décisions plus éclairées pour votre cabinet.



BALAYEZ OU CLIQUEZ POUR DEMANDER UNE VISITE



SIMPLIFIEZ VOTRE LIVRAISON ET VOTRE INSTALLATION

Assurez-vous d’une installation sans heurts et ponctuelle grâce aux services de livraison Midmark. Notre équipe coordonne l’expédition, la livraison, la mise en place et l’installation de votre équipement Midmark afin de vous aider à mener à bien votre projet.



BALAYEZ OU CLIQUEZ POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES SERVICES DE LIVRAISON MIDMARK

SOURCES

- 1 Référence en matière de perte de production : Une étude comparative réalisée par Henry Schein One en 2024 auprès de plus de 2 500 cabinets américains a révélé une production brute moyenne de 7 112 dollars par jour pour les prestataires de soins dentaires généraux. Les sources du secteur indiquent généralement des montants entre 4 000 et 7 000 dollars par jour pour les cabinets généralistes. – Henry Schein One, “Top Providers Nearly Double Average Daily Gross Production,” 2024. <https://hsps.widen.net/s/7tpsrqw7zm/hs1-ja-benchmark---final>
- 2 Référence en matière de frais généraux (60 à 65 %) : Les cabinets dentaires généraux fonctionnent généralement avec des frais généraux de 60 à 65 % (hors rémunération des praticiens). – Overjet, Average Dental Office Overhead: Complete Breakdown by Practice Size (2024–2025). <https://www.overjet.com/blog/average-dental-office-overhead-complete-breakdown-by-practice-size>
- 3 Calcul des frais généraux à 85 % : Dental Economics rapporte que les coûts variables réels, tels que les fournitures (~6 %) et les frais de laboratoire (~8 %), représentent au total environ 14 % des recettes. Le reste (environ 86 %) correspond aux dépenses fixes ou semi-fixes qui continuent même pendant les périodes d’inactivité. Arrondi à environ 85 % des frais généraux courants pour une communication prudente. – Dental Economics, Tracking Dental Practice Overhead and What the Results Mean (1^{er} avril 2021). https://www.dentaleconomics.com/practice/overhead-and-profitability/article/14201431/tracking-dental-practice-overhead-and-what-the-results-mean?utm_source=chatgpt.com
- 4 Gitnux, Customer Experience in the Dental Industry Statistics (29 avril 2025). <https://gitnux.org/customer-experience-in-the-dental-industry-statistics>



Designing better care.®

Solmetex n'est pas une marque commerciale de Midmark Corporation et est la propriété exclusive de son propriétaire respectif.

Midmark est une entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001. Certains produits ne sont pas certifiés. Consultez la liste complète sur midmark.com/ISO.

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre distributeur Midmark ou appelez au 1 800-MIDMARK.

Pour les appels hors des États-Unis, composez le 1 937 526-3662 ou visitez le site Web midmark.com.

© 2026 Midmark Corporation, Versailles (Ohio), États-Unis.
Dans le but d'améliorer nos produits, des changements peuvent être apportés sans préavis.

007-10052-02 Rév. F1 (3/26)

