

LE POWERVAC EST PLUS QUE DE LA PUISSANCE PURE

Le Midmark PowerVac est le premier aspirateur à sec à combiner les fonctionnalités avancées exigées par votre cabinet dentaire en un seul système flexible et performant. Le PowerVac crée une nouvelle norme pour les aspirateurs dentaires à sec avec une puissance et des performances exceptionnelles.

Caractéristiques :

- Conception sans huile et sans eau
- Fonctionnement silencieux
- Haute performance constante - jusqu'à 18 po Hg
- Conception compacte qui utilise un espace au sol similaire à celui des aspirateurs à anneau liquide conventionnels
- Flexibilité évolutive – peut accueillir de 1 à 20 utilisateurs
- Peut remplacer de nombreux types de technologies d'aspiration existantes, quelle que soit la configuration de la plomberie
- Garantie sur le produit inégalée – garantie complète de 5 ans/10 000 heures sur le produit et de 10 ans/20 000 heures sur la pompe

01 La pompe avancée PowerVac dispose d'un silencieux intégré pour réduire le niveau de bruit, ce qui en fait l'un des aspirateurs à sec les plus silencieux du marché.


02 Les roulettes exclusives et robustes facilitent le déplacement et la manœuvre du PowerVac. Les pieds de nivellement réglables le maintiennent à niveau même sur des surfaces irrégulières.

03 Un double ventilateur de 200 pi³/min maintient le PowerVac au frais, ce qui réduit l'usure du moteur et des autres composants internes.

04 Les raccords de tuyaux prêts à l'emploi ne nécessitent aucun outil pour l'installation.

Assurez le bon fonctionnement et la sécurité de votre bureau grâce à la polyvalence, à la durabilité et aux hautes performances de l'aspirateur à sec PowerVac.


COÛTS D'EXPLOITATION AU FIL DU TEMPS*

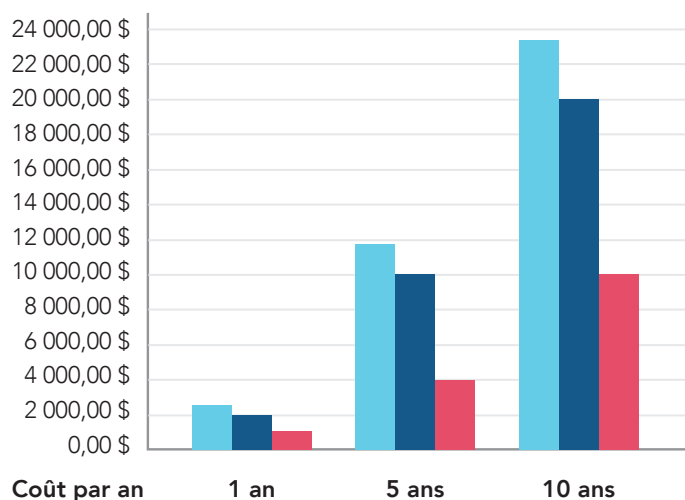

■ Aspirateur à anneau liquide
 ■ Aspirateur à anneau liquide avec recycleur ■ Aspirateur à sec

* 2 000 heures/an avec pompe jumelle de 1 HP. Coûts de l'eau, de l'électricité et des articles d'entretien inclus.

RENDEMENT

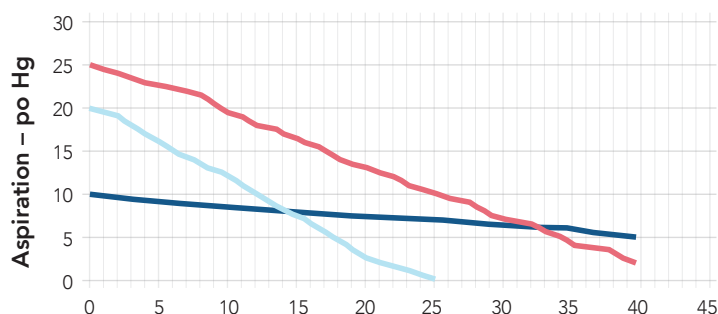

Débit – PCM NOTE : Comparaison d'aspirateur pour 5 utilisateurs

■ PowerVac ■ Aspirateur à anneau liquide
 ■ Ventilateur régénérateur

SPÉCIFICATIONS DU MIDMARK POWERVAC

Modèle/N° de commande	P3 (SIMPLE)	P5 (SIMPLE)	P6 (POMPE JUMELLE)	P7 (SIMPLE)	P10 (POMPE JUMELLE)	P14 (POMPE JUMELLE)
Nombre d'utilisateurs	3 à 5	5 à 7	6 à 10	7 à 10	10 à 14	14 à 20
Nombre d'aspirateurs	1	1	2	1	2	2
Puissance totale	2	3	6	3	6	6
Aspiration (po Hg)	jusqu'à 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18
Tension	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz
Intensité totale	11,4	11,4	11,4 x 2	11,4	11,4 x 2	11,4 x 2
Ampères de disjoncteur	30	30	30 x 2	30	30 x 2	30 x 2
Dimensions hors tout : H x L x P	147,3 cm x 55,9 cm x 55,9 cm (58 po x 22 po x 22 po)	147,3 cm x 55,9 cm x 55,9 cm (58 po x 22 po x 22 po)	147,3 x 142,24 x 55,9 cm (58 x 56 x 22 po)	147,3 cm x 55,9 cm x 55,9 cm (58 po x 22 po x 22 po)	147,3 x 142,24 x 55,9 cm (58 x 56 x 22 po)	147,3 x 142,24 x 55,9 cm (58 x 56 x 22 po)
Base : H x L x P Réservoir : H x L x P	63,5 x 55,88 x 50,8 cm (25 x 22 x 20 po) 86,4 x 55,88 x 55,88 cm (34 x 22 x 22 po)	63,5 x 55,88 x 50,8 cm (25 x 22 x 20 po) 86,4 x 55,88 x 55,88 cm (34 x 22 x 22 po)	63,5 x 55,88 x 50,8 cm (25 x 22 x 20 po) 86,4 x 55,88 x 55,88 cm (34 x 22 x 22 po)	63,5 x 55,88 x 50,8 cm (25 x 22 x 20 po) 86,4 x 55,88 x 55,88 cm (34 x 22 x 22 po)	63,5 x 55,88 x 50,8 cm (25 x 22 x 20 po) 86,4 x 55,88 x 55,88 cm (34 x 22 x 22 po)	63,5 x 55,88 x 50,8 cm (25 x 22 x 20 po) 86,4 x 55,88 x 55,88 cm (34 x 22 x 22 po)
Poids d'expédition	Base – 402 lb Réservoir – 90 lb	Base – 402 lb Réservoir – 90 lb	Base – 402 lb x 2 Réservoir – 90 lb x 2	Base – 402 lb Réservoir – 90 lb	Base – 402 lb x 2 Réservoir – 90 lb x 2	Base – 402 lb x 2 Réservoir – 90 lb x 2



01



02

Accessoires

- 01 Le nettoyant pour système d'évacuation Precision Clense Plus** garde votre aspirateur parfaitement propre, naturellement désinfecté et désodorisé.
- 02 Le séparateur d'amalgame Solmetex® NXT Hg5** est certifié ISO 11143:2008 pour une séparation supérieure à 95 % et répond à toutes les exigences de la « EPA Dental Rule ».

Solmetex® est une marque déposée appartenant à Solmetex, LLC.

007-10068-02 Rév A1 (5/22)
 © 2018 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio, États-Unis.
 Tous droits réservés.



Conforme à la norme NFPA 99C niveau 3

