

  
midmark®

MÉDICAL

# Table d'examen pédiatrique 640

# Des soins sûrs et sécurisés pour vos patients les plus précieux



Lorsque l'on prodigue des soins aux nourrissons, le fait de déplacer le patient d'un poste à l'autre peut créer un malaise et des risques inutiles. C'est pourquoi nous avons conçu la Table d'examen pédiatrique Midmark® 640 pour peser, mesurer et examiner les nourrissons à un seul et même endroit sûr et sécurisé. Parce que chez Midmark, nous pensons que la personne qui utilise notre équipement est tout aussi importante que les fins et les façons dont elle est utilisée.



# Peser, mesurer et examiner les nourrissons en toute sécurité

La Midmark® 640 possède des fonctionnalités qui peuvent vous aider à peser, mesurer et examiner les nourrissons en toute sécurité, avec précision et efficacité. Appuyez sur le bouton d'activation/zéro et l'écran de la balance affichera « Scale ready » (balance prête) au terme de quelques secondes. Placez le nourrisson sur la balance et le poids s'affichera automatiquement. Lorsque vous voulez mesurer le patient, il suffit de sortir l'infantomètre puis de le remettre à sa place lorsque vous avez terminé.



**01 La fonction « Reweigh » (Repeser)** vous permet de reprendre le poids en appuyant sur un bouton - pas besoin de remettre le nourrisson sur la table.

**02 La hauteur de surface de 91,4 cm (36 pouces)** permet un accès facile et réduit le besoin de se baisser de manière répétée pendant l'examen.

**03 Les pans d'extrémité rembourrés, les bords latéraux et les surfaces planes sans arêtes vives** contribuent à la sécurité du patient.

**04** Pour le stockage, la table possède un **tiroir surdimensionné** ainsi qu'un **compartiment pour le stockage en vrac** conçu pour garder les couches et le matériel.



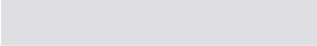
**05** Un **porte-rouleau de papier** avec bande de déchirure dissimulé à une extrémité rend la table encore plus pratique.



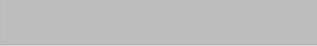
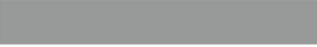
**06** La **balance intégrée** mesure en livres ou en kilogrammes avec verrouillage de l'appareil pour assurer la cohérence et s'éteint automatiquement après 30 secondes pour économiser l'énergie.

# COLORIS DISPONIBLES

## COLORIS STANDARD DE LA GARNITURE

	Brume 813
	Pierre 814
	Chemin reposant 858
	Minerai de fer 851
	Gris lunaire 845
	Obsidienne 857
	Oasis 843
	Bleu apaisant 855
	Rêve 847
	Minéral 844
	Eaux thermales 848
	Jardin ombragé 853
	Agrumes 849
	Escapade sablée 850
	Cuivre curatif 846
	Canneberge 859
	Lin foncé 856
	Latte 860
	Marron profond 852
	Terre profonde 854

## COLORIS DE LA GARNITURE ULTRAFREE\*

	UltraFree Pierre 865
	UltraFree Chemin reposant 868
	UltraFree Obsidienne 867
	UltraFree Havre 861
	UltraFree Agropyre 862
	UltraFree Épices 863
	UltraFree Canneberge 869
	UltraFree Lin foncé 866
	UltraFree Latte 870
	UltraFree Branche 864

# SPÉCIFICATIONS

## 640

Capacité de poids du patient :  
2 kg (4,5 lbs) - 18 kg (40 lbs)

Résolution de la balance :  
0,5 oz pour les livres-onces  
0,02 lb pour les livres  
0,01 kg pour les kilogrammes

Précision de la balance :  
< 10 kg (22 lbs) +/- 28 g (1,0 oz)  
≥ 10 kg (22 lbs) +/- 56 g (2,0 oz)

Le bras de mesure intégré offre  
une plage de mesure de 38,1 à  
91,4 cm (15 à 36")

Hauteur de travail :  
90,8 cm (35,8")

Longueur du dessus de table :  
106,4 cm (41,9")

Largeur du dessus de table :  
52,7 cm (20,8")

Porte-rouleau de papier :  
La partie supérieure de la table  
peut accueillir un rouleau long  
de 35,6 cm (14") et de 7,6 cm (3")  
de diamètre

Tiroir :  
83,8 cm x 38,1 cm x 10,5 cm  
(33" x 15" x 4,125")

Le tiroir est fabriqué en  
polystyrène à résistance élevée  
aux chocs avec des angles  
arrondis permettant un nettoyage  
facile et est monté sur des rails  
en acier latéraux avec roulement  
à bille.

Compartiment pour le stockage  
en vrac :  
85 cm x 43,2 cm x 46,7 cm  
(33,5" x 17" x 18,38")

## NORMES DE SÉCURITÉ

La table 640 est conforme à la  
norme de sécurité médicale 60601  
pour les États-Unis et le Canada.

## OPTIONS

Serrures porte/tiroir



Designing better care.®



Conforme à la norme CARB 93129.2 phase 2 et au titre IV de la norme TSCA

Les exemples de coloris présentés sont la meilleure représentation du matériau d'origine. La couleur réelle peut varier légèrement. Nous vous recommandons vivement de contacter Midmark Customer Experience au 1-800-MIDMARK pour demander un échantillon avant de passer votre commande.

Midmark est une société certifiée ISO 13485 et ISO 9001. Certains produits ne sont pas inclus. Voir la liste complète sur : [midmark.com/ISO](http://midmark.com/ISO)

Pour obtenir de plus amples informations, contactez votre revendeur Midmark ou appelez le : 1.800.MIDMARK

En dehors des États-Unis, appelez le : 1.937.526.3662 ou visitez notre site Web : [midmark.com](http://midmark.com)

© 2021 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio, États-Unis  
Produits pouvant faire l'objet de modifications et d'améliorations sans préavis.  
Litho aux États-Unis.

007-10405-02 Rév. A1 (11/21)

  
midmark®