



MÉDICAUX

Stérilisateurs



L'équilibre entre les soins et les enjeux de traitement des instruments



Le traitement des instruments est une tâche strictement réglementée qui nécessite beaucoup de temps et de travail. Il peut être difficile pour le personnel de donner la priorité à l'expérience du patient tout en assurant la stérilisation appropriée des instruments. C'est pourquoi nous avons conçu **les stérilisateurs à vapeur Midmark^{MD}** pour faciliter et automatiser autant que possible le traitement des instruments dans le respect des pratiques cliniques exemplaires.



Stérilisateurs à vapeur Midmark^{MD}

EN INVESTISSANT DANS UN STÉRILISATEUR MIDMARK, VOUS ÊTES ASSURÉ D’OBTENIR LE MEILLEUR : NOS STÉRILISATEURS DOMINENT LE MARCHÉ DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES.

Les stérilisateurs à vapeur Midmark sont conçus pour offrir des instructions intuitives qui simplifient la conformité, le déroulement des cycles, ainsi que l’entretien et le suivi des appareils. Ils contribuent à **réduire les erreurs de transcription et de consignation, responsables de 56 % des erreurs de stérilisation¹**. L’automatisation de la surveillance des mécanismes et des rapports sur les indicateurs chimiques permet de gagner du temps, simplifie la formation du personnel et renforce leur confiance dans l’utilisation des équipements de traitement.

INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE : Naviguez dans la configuration du cycle et d’autres processus dans votre langue préférée (anglais, français ou espagnol) sur un écran tactile de 12,7 cm (5 po), clair, résistant aux empreintes de doigts et compatible avec l’usage de gants. Choisissez un affichage clair ou sombre.

 **BALAYEZ LE CODE POUR VOIR LA VIDÉO.**

 **PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT**
Enregistrez votre garantie dès aujourd’hui pour profiter d’une assistance rapide en cas de besoin et inscrivez-vous pour être informé des futures mises à jour logicielles.



- 01 STÉRILISATEUR À VAPEUR MIDMARK M11**
Sa chambre de 28 cm x 46 cm en fait l’un des plus grands stérilisateurs de comptoir standard du marché.
- 02 STÉRILISATEUR À VAPEUR MIDMARK M9**
Disposez de toute la puissance de stérilisation fiable dont vous avez besoin grâce à un appareil compact parfait pour un espace réduit.

Les stérilisateurs Midmark sont conçus pour rendre le traitement des instruments aussi simple et automatisé que possible.

**EMBALLÉ**
132 °C (270 °F), 4 MIN

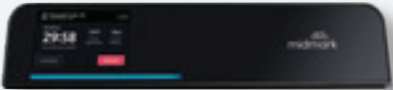
**EMBALLÉ**
135 °C (275 °F), 3 MIN

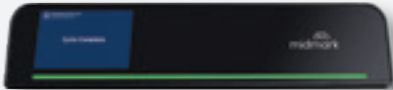
**DÉLICAT**
135 °C (250 °F), 30 MIN

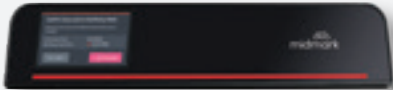
**DÉBALLÉ**
132 °C (270 °F), 3 MIN

**5 CYCLES PERSONNALISÉS***
De 121 °C à 135 °C (de 250 °F À 275 °F), DE 3 À 45 MIN

Suivez à distance l’état du cycle (cycle en cours, cycle terminé et erreur de cycle) grâce à une barre lumineuse DEL à code couleur évolutif, un minuteur de grande taille et des signaux sonores.

**CYCLE EN COURS**

**CYCLE TERMINÉ**

**ERREUR DE CYCLE**

Simplifiez le flux de travail clinique grâce aux stérilisateurs à vapeur à évacuation dynamique de l’air qui disposent de cycles préétablis uniques répondant aux recommandations du CDC et de l’AAMI pour les cycles de stérilisation des instruments emballés².

* Ces cycles ne sont pas approuvés par la FDA et la validation de la stérilité des instruments traités à l’aide d’un cycle personnalisé est de la responsabilité de l’utilisateur.

4 Stérilisateurs

5



SUIVI SIMPLIFIÉ DE LA CONFORMITÉ :

Les rappels et notifications de l'appareil, l'authentification des utilisateurs, le stockage illimité des événements d'entretien régulier pendant toute la durée de vie du stérilisateur, ainsi que l'enregistrement automatisé du déroulement des cycles assurent votre préparation constante pour toute vérification. Téléchargez facilement l'historique des soins de routine, des cycles et des erreurs sur la clé USB fournie pour le stockage externe ou l'impression.



**BALAYEZ LE CODE
POUR VOIR LA VIDÉO.**



DURABILITÉ : Les stérilisateurs Midmark ont été conçus pour durer, avec notamment une durée de vie accrue de 25 000 cycles grâce à une chambre entièrement repensée. Cette amélioration réduit de plus de moitié la maintenance nécessaire par les utilisateurs et les techniciens certifiés.



**BALAYEZ LE CODE
POUR VOIR LA VIDÉO.**

ACCESSOIRES



9A307001 – OUTIL À MAIN FROID
(outil de retrait de plateaux et cassettes)



**9A694001 – REMPLISSAGE
AUTOMATIQUE 115 V**
(9A694002 – Remplissage
automatique 230 V disponible)



9A698001 – TROUSSE USB
Téléchargez les données des cycles, y compris la durée, la température et la pression. Comprend une clé USB, un câble USB et une carte PC (pour les remplacements USB uniquement, installation par un technicien requise).



**9A703001 – SUPPORT DE
CASSETTES VERTICAL**
(modèles de stérilisateur à
vapeur M11 uniquement)



9A586002 – UNITÉ VISTACOOl™

ENTRETIEN ET SOUTIEN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consultez les spécifications techniques des stérilisateurs à vapeur Midmark M9^{MD} et M11^{MD}.



**BALAYEZ LE CODE
POUR VOIR LES
SPÉCIFICATIONS.**

SERVICES DE LIVRAISON MIDMARK

Coordination, livraison et installation à temps, à chaque fois.



**BALAYEZ LE
CODE POUR VOIR
VOS OPTIONS.**

CONCEPTION EN DIRECT DE MIDMARK

Nos experts en conception sont prêts à vous accompagner tout au long du processus.



**BALAYEZ LE
CODE POUR VOIR
LA VIDÉO.**

FORMATION CLINIQUE

Faites confiance à nos formateurs experts pour l'installation de vos appareils Midmark.



**BALAYEZ LE CODE
POUR VOIR LES
FORMATIONS.**

RÉPARATION ET ENTRETIEN

Découvrez nos plans d'assistance et de soutien afin d'obtenir le niveau de couverture dont vous avez besoin pour maintenir votre équipement et vos appareils médicaux opérationnels. Notre offre comprend des plans d'entretien et d'inspection périodiques ainsi que des plans de garantie prolongée.



**BALAYEZ LE CODE
POUR OBTENIR DU
SOUTIEN.**

SOURCES

1 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6252925>

2 <https://www.fda.gov/media/80265/download>



Designing better care.®



USGBC^{MD} et le logo associé sont des marques déposées appartenant au US Green Building Council^{MD} et sont utilisés avec permission.

Midmark est une entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001. Certains produits ne sont pas certifiés. Consultez la liste complète sur midmark.com/ISO.

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre distributeur Midmark ou appelez le 1 800-MIDMARK.

Pour les appels hors des États-Unis, composez le 1 937 526-3662 ou visitez le site Web midmark.com.

Le système VistaCool^{IMC} est fabriqué par Crosstex International Inc. et distribué par Midmark Corporation, située à Versailles (Ohio).

VistaCool^{IMC} est une marque déposée de Crosstex International Inc., une société de Cantel Medical, située à Hauppauge (New York).

© 2026 Midmark Corporation, Versailles (Ohio), États-Unis. Dans le but d'améliorer nos produits, des changements peuvent être apportés sans préavis.

007-10478-02 Rév. D1 (2/26)

