



Esterilizadores

MÉDICOS



Compaginar la atención al paciente con la esterilización de instrumentos



La esterilización de instrumentos es una tarea sujeta a regulaciones muy estrictas que requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, lo que puede generar dilemas para el personal, que debe decidir entre dar prioridad a la experiencia del paciente o esterilizar adecuadamente los instrumentos que utiliza. Así pues, diseñamos los **esterilizadores de vapor Midmark®** para facilitar al máximo la esterilización de instrumentos y el cumplimiento de las prácticas clínicas óptimas, automatizando los procesos siempre que sea posible.



Esterilizadores de vapor Midmark®

APOSTAR POR ESTERILIZADORES MIDMARK ES APOSTAR POR LO MEJOR: NUESTROS ESTERILIZADORES SON LÍDERES EN EL MERCADO AÑO SÍ Y AÑO TAMBIÉN.

Los esterilizadores de vapor Midmark están diseñados con instrucciones intuitivas que facilitan el cumplimiento normativo, el manejo de los ciclos y el mantenimiento y registro del equipo, lo que puede ayudar a **reducir los errores de transcripción y documentación, que representan el 56 % de los errores de esterilización.**¹ El control mecánico automatizado y la generación de informes mediante indicadores químicos ahorran tiempo, simplifican la formación del personal y ofrecen un mayor nivel de confianza a la hora de procesar los instrumentos.

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA: Configure los ciclos y gestione otros procesos en el idioma de su preferencia (inglés, francés o español), con una pantalla táctil de 5 pulgadas, clara y resistente a huellas dactilares que puede utilizarse incluso con guantes. Elija el modo que desee: claro u oscuro.

 **ESCANEAR PARA VER EL VÍDEO**

 **PROTEJA SU INVERSIÓN**
Registre su garantía hoy mismo para recibir asistencia inmediata cuando la necesite y suscríbase a las notificaciones para estar al día de las actualizaciones de software que vayan apareciendo.



- 01 ESTERILIZADOR DE VAPOR MIDMARK M11**
La cámara de 27,94 x 45,72 cm lo convierte en el esterilizador de encimera estándar más grande del mercado.
- 02 ESTERILIZADOR DE VAPOR MIDMARK M9**
Toda la potencia y fiabilidad de esterilización que necesita en una unidad compacta perfecta para zonas con espacio reducido.

Los esterilizadores Midmark están diseñados para facilitar al máximo el procesamiento de los instrumentos y automatizar los procesos siempre que sea posible.



ENVUELTOS
132 °C, 4 MIN



ENVUELTOS
135 °C, 3 MIN



DELICADOS
121 °C, 30 MIN




SIN ENVOLVER
132 °C, 3 MIN




5 CICLOS PERSONALIZADOS*
121-135 °C, 3-45 MIN

Simplifique el flujo de trabajo clínico con esterilizadores de vapor de eliminación dinámica del aire que ofrecen ciclos preestablecidos únicos para cumplir con las recomendaciones relativas a los ciclos de esterilización de los CDC y de la AAMI para instrumentos envueltos.²


Identifique el estado del ciclo (en curso, finalizado o con error) a distancia gracias a una barra led codificada por colores, un reloj de cuenta atrás de gran tamaño y señales acústicas.

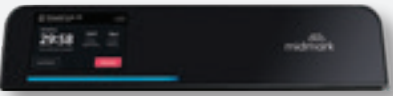

CICLO EN CURSO

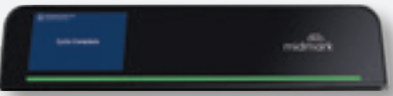

CICLO FINALIZADO

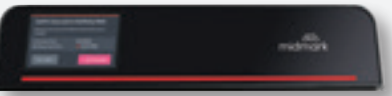

CICLO CON ERRORES

* Estos ciclos no han recibido la autorización de la FDA, por lo que la validación de la esterilidad de los objetos procesados mediante un ciclo personalizado es responsabilidad del usuario.



REGISTRO EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO:
Tenga todo siempre preparado para posibles auditorías con los recordatorios y notificaciones del equipo, autenticación de usuarios, almacenamiento ilimitado de eventos de mantenimiento durante toda la vida útil del esterilizador y registro automatizado de ciclos. Descargue fácilmente el historial de mantenimiento, ciclos y errores en el USB que se incluye para guardarlo de forma externa o imprimirlo.



ESCANEAR PARA
VER EL VÍDEO



DURABILIDAD: los esterilizadores Midmark están diseñados para durar mucho tiempo, con una vida útil ampliada de 25 000 ciclos gracias a una cámara que se ha rediseñado en su totalidad, lo que reduce a más de la mitad la frecuencia de mantenimiento que necesitan tanto por parte de los usuarios como de los técnicos certificados.



ESCANEAR PARA
VER EL VÍDEO

ACCESORIOS



9A307001 HERRAMIENTA DE AGARRE TÉRMICO
(herramienta de extracción de bandeja y cassetes)



9A694001 LLENADO AUTOMÁTICO DE 115 V
(9A694002 Llenado automático de 230 V disponible)



9A698001 KIT USB
Descargue los registros de los ciclos con información sobre el tiempo, la temperatura y la presión. Incluye una unidad USB, un cable USB y una placa de circuito (solo para sustituciones de USB; la instalación debe realizarla un técnico cualificado).



9A703001 RACK DE CASSETES VERTICAL
(solo para los esterilizadores de vapor M11)



9A586002 UNIDAD VISTACOO™

SERVICIOS Y ASISTENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Consulte las especificaciones técnicas de los esterilizadores de vapor Midmark M9® y M11®.



ESCANEAR PARA VER
LAS CARACTERÍSTICAS

SERVICIOS DE ENTREGA DE MIDMARK
Coordinación, entrega y montaje puntuales en todo momento.



ESCANEAR
PARA VER LAS
OPCIONES

SERVICIO DE REPARACIÓN
Explore los planes de asistencia y servicio disponibles y obtenga el nivel de cobertura que necesita para mantener sus equipos y dispositivos médicos en buen estado. Hay planes de mantenimiento e inspección periódicos, así como de garantía ampliada.



ESCANEAR PARA
OBTENER AYUDA

DISEÑO EN TIEMPO REAL DE MIDMARK
Nuestros expertos en diseño estarán encantados de ayudarle siempre que lo necesite.



ESCANEAR PARA
VER EL VÍDEO

FORMACIÓN CLÍNICA
Confíe en nuestros formadores expertos para que le ayuden a implementar sus dispositivos Midmark.



ESCANEAR PARA VER
LAS OPCIONES DE
FORMACIÓN

FUENTES

1 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6252925>
2 <https://www.fda.gov/media/80265/download>



Designing better care.®



USGBC® y su logotipo son marcas comerciales propiedad de US Green Building Council® y se utilizan con autorización.

Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001. Algunos productos no están incluidos. Consulte la lista completa en midmark.com/ISO

Para obtener más información, contacte con el distribuidor de Midmark o llame al 1.800.MIDMARK

Si contacta desde fuera de Estados Unidos, llame al 1.937.526.3662 o visite nuestro sitio web: midmark.com.

El sistema de drenaje directo VistaCool™ para agua de desecho del autoclave está fabricado por Crosstex International, Inc., para su distribución por Midmark Corporation, Versailles, OH.

VistaCool™ es una marca comercial de Crosstex International, Inc., Cantel Medical Company, Hauppauge, NY.

© 2026 Midmark Corporation, Versailles, Ohio, EE. UU. Productos sujetos a cambios de mejora sin previo aviso.

007-10478-03 Rev. D1 (2/26)

